



mediroyal 

Orthoses are our passion

# Mediroyal Malletskenor

*Effektiv immobilisering av DIP-leden*






# Mediroyal Malletskenor

*Effektiv immobilisering av DIP-leden*

Mediroyals malletskenor finns i två olika material; ABS plast som enkelt kan justeras med en sax eller Polykarbonat som är genomskinlig och mycket stabil. Båda modellerna har en lätt extensionsvinkel för att hålla DIP-leden sträckt och immobiliserad för att kunna läka. Skenan har ventilationshål som är placerade både dorsalt och volart på skenan.

Båda skenorna kan justeras med varmluftspistol. ABS-skenan kan också justeras i längd med hjälp av en sax. PIP-leden skall alltid vara fri vilket kan göra att den dorsala delen på skenan kan behöva kortas. Finns i 8 olika storlekar som passar de flesta fingrar.

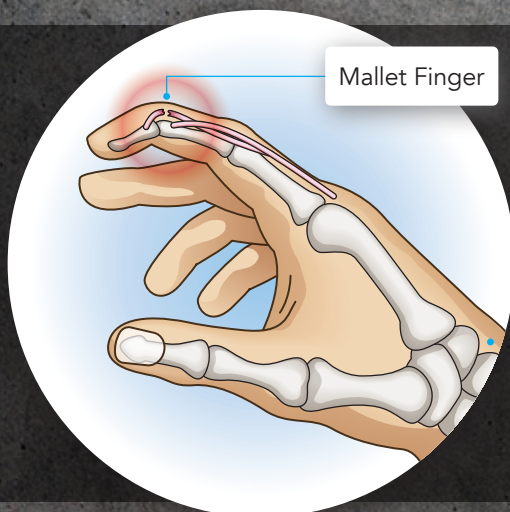

## Malletskada

En malletskada orsakas av en partiell eller komplett ruptur av extensorsenan som sträcker fingrets DIP-led. Resultatet blir att DIP-leden inte kan sträckas aktivt. I vissa fall kan senskadan också innefatta en liten fraktur vid senans infästning på fingret.




Malletskador är vanliga i kontaktsporter men kan ibland orsakas av enklare vardagssysslor som när fingret fastnar när man tar av sig strumpan eller bäddar sängen. En malletskada tar långt tid att läka och det är viktigt att DIP-leden är immobiliserad dygnet runt i minst 6 veckor.

# NRX®

## 2007 · NRX® Strap Kit för Malletskena

Skenan appliceras oftast med hudvänlig oelastisk tejp över fingret. NRX® Strap PLUS är ett alternativt band som kan fästas på skenan med hjälp av en självhäftande hake som placeras över skenans dorsala del. NRX® Strap-materialet är oelastiskt och förhindrar att skenan glider av fingret och kan enkelt justeras i längd. Den självhäftande hakdelen appliceras på skenans dorsala del och bandet fästs in mot detta. NRX® Strap Kit finns i 10-pack.

**Indikationer:** Malletskador eller vid behov av totalimmobilisering av DIP-leden.

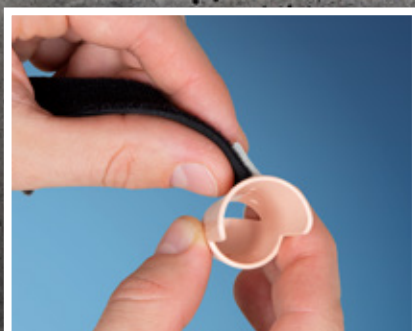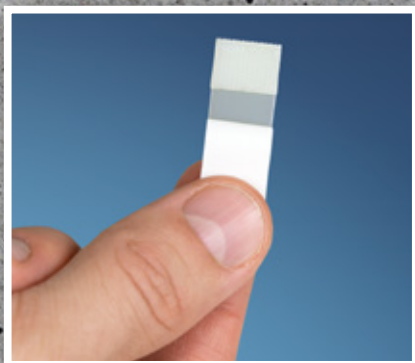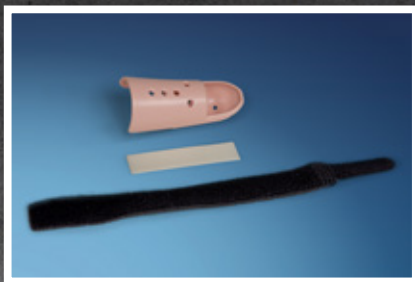

- 2003** Genomskinlig Polykarbonat · Singelförpackning
- 2003/10** Genomskinlig Polykarbonat · 10-pack
- 2004** Genomskinlig Polykarbonat · Sortimentsförpackning med en storlek av varje
- 2005** ABS Hudfärgad · Singelförpackning
- 2005/10** ABS Hudfärgad · 10-pack
- 2006** ABS Hudfärgad · Sortimentsförpackning med en storlek av varje
- 2007** NRX Strap Kit för Malletskena med självhäftande kardborredelar · 10-pack

### Storlekstabell

Storlek	1	2	3	4	5	5,5	6	7
Omkrets DIP-leden i mm	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	65–70	70–80	80–90
Skenans längd mm	50	53	57	60	58	61	61	63

NRX® är ett registrerat varumärke för Mediroyal Nordic AB



Mediroyal  
Multi-fingerskena



PROXI®  
DIP/PIP Fingerskena



Orthoses are our passion

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna, Sweden  
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se