

mediroyal 

MEDIROYAL SKOINLÄGG


SPRINGER


formthotics™

TULI'S®



SPRINGER



B176423 Comfort Springer med & utan pelott

Ett smidigt inlägg med eller utan pelott, thermoplastbotten överdragen med perforerat microskinn. Extra förstärkning över valvet ger ett mycket bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.



B173423 Comfort ¾-inlägg i microskinn

Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten överdragen med ett perforerat microskinn. Extra förstärkning över valvet ger ett bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.



B176487 Comfort Springer med pelott, Beige

Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2 mm tryckavlastande PPT, överdragen med microfiber. Extra förstärkt över valvet vilket ger ett mycket bra stöd.



B173487 City Springer ¾-inlägg med pelott, Beige

Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2mm tryckavlastande PPT, överdragen med microfiber. Extra förstärkning över valvet ger ett mycket bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.

Storlek: 35-48

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

B1000 Sport

En sportsula i helfabrikat som kan värmas och justeras individuellt. Har en kärna av thermoplast som ger bra stabilitet, överdragen med 1,5 mm PPT och 1 mm microperforerad EVA. Ger stöd över fotvalvet och avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster.



B1730 Fotbollsinslägg ProPrio

ProPrio fotbollsinslägg är speciellt framtaget för att ge en proprioceptisk effekt med hjälp av stödpunkter för foten. Dessa stödpunkter hjälper till att öka receptiviteten från foten och ger ett individuellt stöd. Inlägget är speciellt anpassat för fotbollsskor. Kommer med pelott. Tillverkad av en thermoplastkärna som är överdragen med 1 mm EVA och slitstarkt microfiber. Storlek: 36-46.

OBS! Ej lagervara.



B1001 Comfort plus

Ett mycket tunt och smidigt inlägg med pelott som ger ett skönt stöd över både häl och hålfot. Tillverkad av en tunn och stabil thermoplastkärna med 1,5 PPT som är överdragen med microfiber.



B1003 TOV Microfiber Beige

Inlägg med pelott som ger stöd över fotvalvet och avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster.

Indikationer: vid plattfot, spretfot, pes valgus, posttraumatiska fotdeformiteter, hälsenebesvär och knä- och ryggsmärtor.



Storlek: 35-48

Omformningsbar: Ja, vid 110° C



B126292 Pumpsinlägg med pelott i framfoten

Pumpsinlägg är ett tunt inlägg som passar särskilt bra i skor med litet utrymme. Det är bekvämt och kan användas till klackar som är mellan 3-8 cm höga.

Ger stöd för fotvalvet. Avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster. Storlek: 35-46



B1004 Comfort

Comfort har ett 2 mm tryckavlastande PU-skikt (mjukstopppning) över hela ytan som ger en behaglig dämpning av steget, vilket är utmärkt för trötta fötter. Skoinlägget har även ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden.

Indikationer: plattfot, spretfot, pes valgus, posttraumatiska fotdeformiteter, hälsenebesvär och knä- samt ryggsmärtor. Storlek: 35-47/48



B1002 Lange Inlägg, vuxen

En tunn och smidig Lange-modell med högre kanter och pelott. En formfast termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Överdraget med mjuk och behaglig microfiber. Justeringar eller omformning kan göras över individuell läst. Storlek: 35-47/48



B1005 Comfort Hög

Comfort Hög har ett 2 mm tryckavlastande PU-skikt (mjukstopppning) över hela ytan som ger en behaglig dämpning av steget, vilket är utmärkt för trötta fötter.

Skoinlägget har även ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden. Storlek 35-47/48

Indikationer: se under B1004 Comfort.

Omformningsbara: Ja, vid 110° C

B276335 Hälsporreinlägg med avlastningszon

Ett inlägg som designats för att avlasta området mediallyt om calcaneus i kombination med området över flexor hallucis longus. Thermoplastkärnan har en utskärning över hälen med PU-skum. Inne i materialet (2 mm EVA) ligger sedan Poron över flexor hallucis longus-området. Inlägget är överdraget med microläder. Inlägget har pelott. Storlek: 35-48



B136600 Skalinlägg Hallux Carbon

Skoinlägget har ett styvt lager kolfiber som löper från hålfoten fram under stortån (hallux), vilket minskar böjning av stortåleden och därmed belastningen av stortåleden vid gång.

Indikationer: Hallux limitus/rigidus/valgus, artros och artit i stortåleden. Storlek 35-48



B136687 Hallux Carbon med pelott

Ett skoinlägg tillverkat av ett starkt och flexibelt kolfiber med ett vadderat PU-tytlager (2 mm) samt ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden. Konstruerad för att begränsa smärtsamma rörelser i stortåns grundled. Storlek 35-46

Indikationer: Hallux limitus/rigidus/valgus, artros och artit i stortåleden.



B663018 Carboninlägg

Plana termoplastiska carbon-inlägg (1,9 mm). Inläggen kan slipas till efter önskad form och formas om av en temperatur på minst 90° – max 240° C.

Storlek: 35-48



Omformningsbara: Ja, vid 110° C



B2231 Wide HK special 5 mm TOV Blå

En EVA-sula med 2 skikt EVA, blå 35 och vit bas 50 shore med metatarsalpelott i framfoten.

De två materialen är speciallaminerat i produktion vilket innebär att de inte kan delaminera vid uppvärmning. Sulan ska modifieras över läst eller slipas in.



B2232 Wide HK special 6 mm TOV Beige

En EVA-sula med 2 skikt EVA, Beige 30 och vit bas 50 shore med metatarsalpelott i framfoten.

De två materialen är speciallaminerade i produktion vilket innebär att de inte kan delaminera vid uppvärmning. Sulan ska modifieras över läst eller slipas in.



B51456 Soft inlägg Röd

Inlägg med hel bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av röd Springolon Plus 10 shore. Bindsula som en komfortsko. Pelott finns bifogad.



B41456 Diasoft inlägg Röd $\frac{3}{4}$ -bas

Inlägg med med $\frac{3}{4}$ -bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå plastazote 20 shore och toppskikt av röd Springolon Plus 10 shore. Bindsula som en komfortsko. Pelott finns bifogad.

Storlek: 35-48

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

B71456 Diapedica EVA med pelott

Basen på denna sula är EVA 45 shore och toppskiktet består av 3 mm Luna EVA. Eftersom EVA har slutna celler går det bra att tvätta ytan med tvållösning eller antibakteriella medel.

Indikationer: För diabetiker och patienter med sår.

Storlek: 35-48



B5036 Orthosoft Barn

Ett mjukt EVA-inlägg med höga kanter. Ca. 15 mm materialtjocklek och kan enkelt formas över läst.

Dubbelstorlek: 19/20-41/42



B130 ProPrio Sensorimotor

De utmärkande egenskaperna hos dessa fotortoser är de stimulerande elementen som är unikt arrangerade över ytan. Nervsystemet bearbetar de riktade sensstimuli och reagerar genom att anpassa sin muskeltonus. Trycket från stimuli kan avlasta muskler och leder och därigenom korrigera gångmönster eller positivt påverka rörelsevanor.

Dubbelstorlek: 19/20-35/36 **OBS! Ej lagervara.**



B5238 Lange Svart

Ett Lange-inlägg med bred läst som är klätt med svart microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka.

Dubbelstorlek: 19/20-47/48



Omformningsbar: Ja, vid 110° C

B5237 Lange – Barn

Ett Lange-inlägg med smal läst som är klätt med microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka.

Dubbelstorlek: 19/20-25/26



B5138 Lange med bred läst

Ett Lange-inlägg med 3 mm EVA som är klätt med microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Dubbelstorlek: 19/20-47/48



B5137 Lange med smal läst

Samma utformning som B5138.

Dubbelstorlek: 19/20-41/42



B5038 Lange i multifärgat EVA

Utformningen är densamma som sulorna B5138 och B5137. Dubbelstorlek: 19/20-39/40



Omformningsbar: Ja, vid 110° C

TULI'S®



Tulis Classic Hälkopp

Tulis patenterade "våffeldesign" absorberar stötvågen och returnerar dess energi precis på samma sätt som man sett i fotens konstruktion. Tulis "våffeldesign" komprimeras och roterar vid normal fotrörelse för att absorbera stötvågen som bildas vid gång och löpning. Precis som en fjäder returnerar Tulis hälkopp energin för maximal prestation. Säljs i par.

Indikationer: Promenader eller löpning, extra stötdämpning för hälen och avlastning eller prevention av plantarfasciit.

TU10010 Medium (under 80 kg), TU10020 Large (över 80 kg)



Tulis Heavy Duty Hälkopp

Dubbelt så tjock som Tulis Classic. Erbjuder maximal prestation och maximalt skydd när du behöver det som bäst. Säljs i par.

Indikationer: Avlastning eller prevention av plantarfasciit, hälseneinflammation, Apofysit, Severs skada, sportaktiviteter och löpning samt avlastning vid benhinneinflammation.

TU10211 Small (under 40 kg), TU10212 Medium (under 80 kg)
TU10214 Large (över 80 kg)



Tulis SoSoft Heel Cups

Utformade för att vara lättare, mjukare och mer motståndskraftig än andra hälkoppar. Mjukt tygmaterial kombinerat med gelkonstruktion ger ökad komfort med eller utan strumpor.

Indikationer: Hälsmärta, Plantarfasciitis, hälseneinflammation, benhinneinflammation

TU10207 Medium (under 80 kg), TU10208 Large (över 80 kg)



Tulis Polar Bears Dual Density Heel Cup

Denna hälkopp är designad speciellt för den som lider av hälsporre. Det "våffelmönstrade" blå fältet omgivet av en ring av bekväm TuliGel gör att detta inlägg fördelar trycket på hälen så att det smärtsamma området får lindring.

TU10300 Medium (under 80 kg), TU10310 Large (över 80 kg)

Tulis RoadRunners

En högkvalitativ ersättningssula för att öka fysisk prestation och minska trötthet. Med stabiliserande stöd. Kombinationen av Tulis unika våffelmönster och ett material av polyuretan och poron både lagrar och frigör energi från stötar. Ett bra hjälpmedel mot skada som ger bra avlastning för trötta ben, vader och rygg.

TU1041 st. 36-38, TU1042 st. 39-40
TU1043 st. 41-43, TU1044 st. 44-46



Tulis Plantar Fasciitis Insole

En ersättningssula i full längd designad speciellt för plantarfasciit och liknande fotbesvär. Stödet under det långsgående valvet fördelar kroppsvikten jämt över fötterna för att bidra till ökad stabilitet, balans och bättre hållning.

TU10091 S= 36-38, TU10092 M= 39-41
TU10093 L= 42-44, TU10094 XL= 45-47



Tulis Cheetah

En dynamisk kombination av Tulis Heel Cups stötdämpande teknologi och komforten och stödet från ett lätt neoprenankelstöd. Ger en "barfotakänsla", ett skydd och idealisk komfort för många idrottare inklusive gymnaster och dansare. Ger stöd för trötta och svullna fotleder. Mät omkretsen runt fotens valv och fotrygg.

TU20220 XS= 19 cm, TU20225 S= 19-21,5 cm,
TU20230 M= 21,5-24 cm, TU20240 L= 24-26,5 cm



Tulis X-Brace

Denna enkla men mycket effektiva elastiska fotortos kan lindra smärta i samband med plantarfasciit, hälinflammation och överpronation. Genialiteten med X Brace är hur lätt den är att använda samtidigt som den kan lösa komplicerade problem.

XB900 XX-small S 27-31, XB9001 X-Small 31,5-36,
XB9002 Small 36,5-40, XB9003 Medium 40,5-43,
XB9004 Large 43,5-45, XB9005 X-Large 45,5-47





3540 Medical Low Volume Svart

För skor med smalare tåbox som finskor, cykelskor och spikskor. Tillverkad av ett fastare EVA med ett lätt till medelfast stöd över fotvalvet. Har en låg fotvalvsprofil. Lågprofilsformen är bäst lämpad för en fot med ett genomsnittligt fotvalv som inte behöver specifikt fotvalvsstöd vid onormal pronation. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort. Storlek: XS-XL.



3550 Medical Dual Low Volume Grön

Till skillnad från 3540 har den gröna sulan ett mjukare PE-material på ovansidan för att ge maximal komfort. Designad med en lägre bågprofil och mindre medialt stöd. Lämpar sig bäst för fötter med medelvalv som inte behöver speciellt fotvalvsstöd för pronation. Särskilt bra för skor med dubbar under. Storlek: XXS-XXL.



3520 Medical Svart Fast

Den främsta standardsulan. Fungerar för normala till breda läster. Tillverkad av ett fastare EVA som ger ett medelfast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.

Storlek: XXS-XXL.



3570 Medical Beige Mjuk

Samma utformning som Medical Svart men tillverkad i ett mjukare EVA material. För tryckkänsliga patienter som behöver ett lätt stöd över fotvalvet. Bra för diabetiker eller de med känsliga fötter.

Storlek: XXS-XL.

Storlek	Skostorlek
XXS	34-36
XS	36-38
S	38-40
M	40-42
L	42-44
XL	44-46
XXL	46-



3510 Medical Work Dual

Baserad på Medical Svart men med mjukare PE-material på ovansidan samt perforeringar i framfoten för ökad ventilation. Ger ett medelfast stöd över fotvalvet. Bra för löparskor och patienter som utövar en sport med mycket påverkan genom fot/ben som tex. handboll och badminton. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort. Storlek: XXS-XXL



3530 Medical Shock Stop

Framtagen för att optimera stötupptagning och stöd i samma sula. Tillverkad av fastare EVA med ett skummaterial som formar sig efter foten och ger en känsla av tyngdlöshet. Detta ger ett bra stöd samt extremt hög komfort. Fördelaktig för äldre personer med diabetes, artrit eller andra typer av känsligheter. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort. Storlek: XXS-XXL.



3754 Kil, Varus/Valgus

Ett mångsidigt tillbehör och lämpligt för både fram- och bakfotsmodifieringar. Kan användas för att kontrollera både fram- och bakfötter. Självhäftande. Säljs i par. Storlek: S, M, L



3756/7 Hälkil 4 mm / 10 mm

Placeras under hälområdet. Minskar belastningen på akillessenan och vadmuskeln. Lindrar smärta i bakre ben. Finns i två höjder. Självhäftande. Säljs i par. Storlek: S, M, L



37588/9 Pelotter

Placeras på ovansidan av Formthoticssulorna. Designad för att lyfta den tvärgående bågen och mellanfotsbenen. Lindrar symtomen från neurom, bursit mm. Finns i medium (blå) och fast (svart) hårdhet. Självhäftande. Säljes i par och endast i påsar om 5 par. Storlek: 1= Small, strl. 2= Large



B9002



B9021



B4111

Självklistrande pelotter

Läderklädda pelotter med självhäftande adhesiv. Skumkärnan är tillverkad av latexskum och överdragen med svart skinn. Enkelt att klistra på plats i de flesta skor. Pelotten lyfter och avlastar främre trampdynan effektivt. Bra mot problem med mortons neurom, nedsjunkna främre fotvalv, hallux valgus samt generell belastningssmärta.

B9002 Droppformad pelott,
B9021 T-formad pelott
small 35-37 Medium 38-40
Large 40-43 X-Large 44-46
Säljs styckevis samt 10 par/förpackning


B4111 Pelottsula
Storlek: 35-45



MR1400 Hälsporrekil

Kilen är utvecklad för att avlasta för hälsporre och plantarfasciit. Designad som höger och vänster för att kunna ge en effektiv avlastning medialt.

Indikationer: Vid hälsmärta som plantarfasciit, hälsporre eller vid annat behov av avlastning direkt under hälbenet.

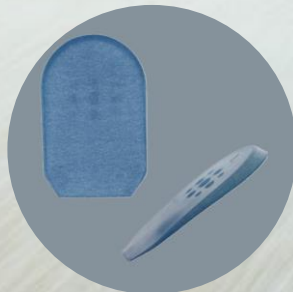

MR1401 Hälkil

Designad för att ge avlastning och stötdämpning. Modellen är något längre än vanliga hälkilar för att ge en effektivare avlastning.

Indikationer: Achillestendiniit, allmän hälsmärta och vid behov av avlastning och extra stötupptagning.




MR1402 Multikil

Utvecklad för att ge stöd vid problem med hälens fettkudde. Kilen har en högre sarg vilket ger ett effektivt stöd åt fettkudden.

Indikationer: Begynnande hälproblem, kollapsad fettkudde.

Small (35-39) Medium (40-42) Large (43-46)

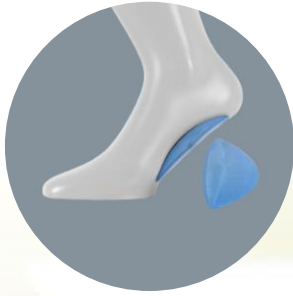

MR1403 Valvstöd

Ett smidigt valvstöd som ger ett bra stöd för hålfoten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta.

Indikationer: höga eller låga fotvalv, smärta över längsgående fotvalvet.

Storlek: S, M, L



MR1411 Helsula Tunn

Helsula med tunnare framfot och tjockare häl. Ger mer plats i skon och bra avlastning och stötupptagning för hela foten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par.

Indikationer: vid överbelastningsskador i nedre extremitet, benhinneproblem orsakade av låg stötupptagning, post-Op efter knä- eller höftplastik.

Storlek; A 35-37, B 37-40, C 40-43, D 44-45, E 46+



MR1500 Mediroyal MOW

Medial Orthotic Wedge är tillverkad av EVA i två densiteter och Poron i hälen för ökad stötdämpning. Stödjer medialt för att kompensera del av pronation.



MR1700 Mediroyal LOW

Lateral Orthotic Wedge stödjer lateralt för att kompensera supination på framfoten. Användbart inom rehabiliteringen för att minska smärta. Stödja och öka ledpositionssinnet. Patienter med knäledsartros kan använda LOW sulan för att ändra belastningen i knäleden vilket kan leda till minskad smärta vid aktivitet och vila. Patienter med laterala fotledsskador och kroniska laterala instabiliteter kan också använda LOW sulan för att minska risken för att trampa snett.

Storlek: Dubbelstorlekar 34/35-46/47



MR1600 XFW extra framfotskil

XFW står för Extra Forefoot Wedge och kan användas tillsammans med Mediroyal MOW och LOW sulorna för att öka korrigeringsgraden. Kilen är tillverkad i EVA med högre densitet (6 mm) och kan användas antingen lateralt eller medialt på framfoten. Den monteras med självhäftande tejp eller limmas på plats permanent med kontaktlim. 1 par/fp.

Universal storlek



EU5300 Hälkopp

Tillverkad i DeRon och PE-skum (2 mm). Används för att öka stötdämpningen i hälregionen på individuellt tillverkade fotbäddar och inlägg av EVA.

1 par/fp.

Universal storlek



DeRon

Ett PU-skum som finns i 3 och 5 millimeters tjocklek. Materialet används för att ge extra dämpning och tryckavlastning.

AC3100 = 3 mm, bredd 140 cm

AC3101 = 5 mm, bredd 140 cm

*Säljs per m²



Microfiberklädsel på rulle

Microfiberklädsel av konstlädertyp för foder och beklädnad till fotbäddar/inläggssulor.

Bredd: 12 cm

Längd: 50 meter **OBS! Ej lagervara.**

Färger:

B20012 Grön

B20017 Blå

B20013 Beige

B20019 Svart

B20016 Brun

B6066

En lättanvänd stabil spegellåda av hög kvalitet som tydligt synliggör fotens belastningsytor med grönt (m fl.) LED ljus.

Max belastning: 135 kg.


Mått: 47x47x11 cm.

CE-märkt enligt det medicinska direktivet MDR 2017/745 klass 1.



Mediroyal Nordic AB
Box 7052
192 07 Sollentuna

08-506 766 00
info@mediroyal.se

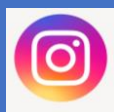

Facebook.com/mediroyalnordic
Instagram.com/mediroyal