



mediroyal 

Orthoses are our passion

Extension 

EXTO[®]-15 Fingerring - 15 graders för Hyperextension

Den nya EXTO[®]-15 är en unik fingerortos för hyperextension eller hypermobilitet i fingerleder. Den kan också användas för radial- eller ulnardeviation för att kompensera och korrigera deformiteten.




EXTO[®]-15 har en 15 graders korrigerande av vinkeln på ändarna för att stoppa hyperextension tidigare och mer effektivt. Ringens längd har gjorts lite längre jämfört med 2008 Multifingerskenan, för att öka hävarmen och ge mer stabilitet och stöd. Kompositionen av polymeren i ringen gör det möjligt att ytterligare korrigera och anpassa ringen individuellt med hjälp av en varmluftspistol.

EXTO[®]-15 finns i storlekarna 1-14 med en asymmetrisk graderad längd av varje storlek. Måttabellen kan användas som en guide till rätt storlek, men en individuell utprovning är alltid att rekommendera.

EXTO[®]-15 finns förpackningarna singel-pack, 3-pack och ett sortimentspack med en ring per storlek.

Indikationer: Produkten har utformats för att stödja och skydda DIP- och PIP-fingerlederna mot översträckning, som svanhalsdeformitet eller överrörlighet. Den kan också användas för radiell- eller ulnardeviation i lederna.

Storlekstabell och förpackningsvarianter 

© Mediroyal Nordic AB 2024

Mediroyal Nordic AB · Box 7052 · 192 07 Sollentuna · Sweden · Tel +46 8 506 766 00
info@mediroyal.se · facebook.com/Mediroyalnordic · www.mediroyal.se

EXTO[®].15

EXTO[®]-15 Fingerring - 15 graders för Hyperextension

Förpackningsvarianter

Exto-15 Fingerring Singelpack

Strl	Art.nr.	Kvantitet
1	2015-01	1 st
2	2015-02	1 st
3	2015-03	1 st
4	2015-04	1 st
5	2015-05	1 st
6	2015-06	1 st
7	2015-07	1 st
8	2015-08	1 st
9	2015-09	1 st
10	2015-10	1 st
11	2015-11	1 st
12	2015-12	1 st
13	2015-13	1 st
14	2008-14	1 st

Exto-15 Fingerring 3-pack

Strl	Art.nr.	Kvantitet
1	2015-01/03	3-pack
2	2015-02/03	3-pack
3	2015-03/03	3-pack
4	2015-04/03	3-pack
5	2015-05/03	3-pack
6	2015-06/03	3-pack
7	2015-07/03	3-pack
8	2015-08/03	3-pack
9	2015-09/03	3-pack
10	2015-10/03	3-pack
11	2015-11/03	3-pack
12	2015-12/03	3-pack
13	2015-13/03	3-pack
14	2015-14/03	3-pack

Exto-15 Fingerring · Sortimentförpackning

Strl	Art.nr.	Kvantitet
1-14	2016	En skena av varje storlek

En av sidorna på skenan är lite bredare än den andra delen. Denna del är markerad med ett X-tecken på utsidan.




Storlekstabell

Observera att måttabellen är en rekommendation för att välja rätt storlek. Den tar inte i beaktande mjukdelssvullnad eller förekomst av ödem. Eftersom de flesta fingrar har en konisk form har skenan en bredare del för att kompensera för detta. Vi rekommenderar en individuell utprovning för bästa funktion.

Storlek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Omkrets PIP-led mm	42-43	44-46	46-50	50-55	55-58	58-60	60-62	62-65	65-68	68-71	71-74	74-77	77-81	81-84
Skenans längd mm	30	31,5	34	36	37	40,3	45	44	47,5	51	51,5	52	52,5	53



Omkrets
i mm

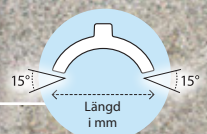

Längd
i mm