



mediroyal

Orthoses are our passion

## Proxi® DC Skena

**– Individuellt anpassningsbar**

Denna fingerskena är särskilt utformad för att immobilisera fingrar konservativt efter exempelvis kirurgiskt ingrepp. Den ger en stabil och säker lösning för patienter som behöver skydd och stöd under rehabiliteringen och förebygger kontraktur i lederna.

Fingerplattan i Proxi® DC Skena är tillverkad i aluminium med en flexzon i plast distalt. Skenan är laminerad i CR-skum som har kardborretyg på utsidan och polstring med Neptune™ på insidan. Detta gör att skenan är tryckavlastande och kan formas individuellt och även kortas med sax vid behov.


Proxi DC Skena är bilateral och finns i tre storlekar. Skenan stöttar två fingrar tillsammans och kan användas för att behandla dig 2–5.

Skenans infästningsband är gjort av NRX® Double Soft Elastic, vilket innebär att det är lätt att klippa och forma för att individanpassa. NRX® Double Soft Elastic kan även stretchas lokalt för att skapa bättre passform för användaren.

**Indikationer:** Dupuytren's kontraktur, kontraktur i fingrarna

MR2705

Storlek	S	M	L
Längd plattform	155 mm	175 mm	195 mm
Bredd plattform	45 mm	45 mm	48 mm

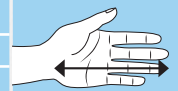

Mönsterskyddad i EU  
under 157077186