

mediroyal 



**HJÄLP FÖR  
FOT &  
FOTLED**

## MBA140 • Armis™ Light Fotled

Armis™ Light fotled är tillverkad av laminerat airmesh-material som ger bra ventilation och stabilitet. Externa stabiliseringsselement runt fotleden ger bra lateral och medial stabilitet. Boa® Closuresystemet har integrerats på ortosens baksida för att ge en lägre profil framtill. Systemet har en polymerbelagd stålvaajer som tillsammans med nylonguiderna på framsidan ger en oöverträffad stabilitet. För att öka greppet i ortosen på insidan har vi lagt till ett semi-elastisk friktionsneopren under fotdelen. Materialet har en kardborrefunktion på ytan där extrabandet kan fästas för att ge individuellt stöd. Extrabandet som kryssas runt fotleden har designats för att fästas in över Boa®-systemet för att skydda det från stötar. Ortosen kan användas utan extrabandet om ett lättare stöd behövs.

Universal.



### MBA140 Armis Ligth Fotled Omkretsmått runt fotledsknöläarna

XX-Small	14-16 cm
X-Small	16-18 cm
Small	18-20 cm
Medium	20-22 cm
Large	22-24 cm
X-Large	24-26 cm

## MBA141 • Armis™ Fotled

Armis™ fotled är tillverkad av ballistisk Nylon med rip-stop funktion som klarar de allra mest krävande aktiviteterna. Armis™ fotleden är utrustad med Boa® Closure System som gör applicering snabb, stabil och enkel. Systemet har en ytbehandlad stålvaajer som ger styrka och hållbarhet tillsammans med nylonöglorna och vaajer-guiderna i plast. Ortosen har en låg profil utan sömmar under foten och över hälsenan finns ett andningsaktivt och elastisk material. Den mediala och laterala stabiliteten kommer från de två plastskenor som finns integrerade på sidorna av ortosen. De individuella kryssbanden används för att ge extra stabilitet för fotleden.

Universal.



### MBA141 Armis Fotled Omkretsmått runt fotledsknöläarna

X-Small	16-18 cm
Small	18-20 cm
Medium	20-22 cm
Large	22-24 cm
X-Large	24-26 cm
XX-Large	28-32 cm

## MR5401 • CRX® Fotled

En fotledsortos med silikonpelletter för att ge optimal kompression över fotleden. Svullnad är en vanlig orsak till nedsatt ledrörlighet. Fotledsstödet är tillverkad i ett speciellt material som ger hög kompression och stöd för fotleden. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Silikonpelletterna i kombination med kompressionen leder också till ökad receptivitet från leden. På grund av den högre kompressionen i materialet skall ortosen endast användas under aktivitet.

Universal.



## MR5402 • CRX® Malleum Plus

En ortos som kombinerar kompression med extra stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög kompression över leden samt silikonpelletter. För extra stöd finns ett elastiskt kardborrband som kan appliceras individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. På grund av den högre kompressionen i materialet skall ortosen endast användas under aktivitet.

Universal.



## MR5406 • CRX® Achillex

En ortos med kompression utvecklat för patienter med hälseneproblematik.

Ortosen har tre olika kompressionszoner med den högsta kompressionen över fotleden. De två andra zonerna trappas ned gradvis över fotleden och underbenet. En silikon-pellett är integrerad över hälsenan. Den ger kompression på sidan av senan för att avlasta och ta bort lokal svullnad.

I hälen finns en integrerad 8 mm hälkil, tillverkad av silikon, för att avlasta hälsenan. Ytterligare en hälkil följer med ortosen och kan användas tillsammans med bandaget för akuta hälseneproblem eller placeras på motstående fot för att undvika obalans. Universal.



MR5401 CRX Fotled (Omkretsmått runt fotledsknölarna)

MR5402 CRX Malleum Plus

MR5406 CRX Achillex (Obs. finns upp till storlek X-Large)

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

## MR5016 • Elastisk fotled

En enkel men effektiv fotledsorts som ger ett bra stöd för fotleden. Tillverkad av ett nät-kompressionsmaterial som tillsammans med kryssbanden ger en effektiv stabilisering och bra kompression över fotleden. Lämplig att bära i skor med lite plats.



### MR5016 Elastisk Fotled

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Skostorlek	35-37	37-39	40-43	44-46	46-



## MR5001 • Elastiskt åttabandage

Ett elastiskt och mycket effektivt åttaband för individuellt stöd för fotleden. Bandet kan lindas individuellt och ger stöd efter behov. Tillverkad i tre storlekar som passar alla.



### MR5001 Elastiskt åttabandage

Storlek	Small	Medium	Large
Skostorlek	34-38	39-42	43-46





## SRX872 • SRX® Universellt Elastiskt Fotledsstöd

Detta elastiska fotledsstöd är tillverkad av rundstickad elastisk textil med spiralelastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

SRX872 Universellt Elastiskt Fotledsstöd  
 Storlek Universal • Cm 18-24



## SRX871 • SRX® Fotledsstöd

Detta fotledsstöd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Materialet ger ett bra stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen lokalt över fotleden. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

Omkretsmåttet tas runt fotleden i höjd med fotknölnarna.



## SRX875 • SRX® Stabilt Fotledsskydd

Detta stabila fotledsskydd med snörning är tillverkat av ballistiskt nylon med air-mesh på insidan. Över hälsenan finns ett elastiskt material placerat för att undvika tryck. Nylonbanden på sidorna kryssas under foten och fästs på sidorna för att ge individuellt stöd. Det övre bandet upptill säkrar både nylondragbanden och snörningen. Fotledsskyddet kan användas för att ge ett mekaniskt stöd och stabilitet över fotleden efter lättare till måttliga stukningar eller för att stödja en instabil fotled under aktivitet. Omkretsmåttet tas runt fotleden i höjd med fotknölnarna.

### SRX871 Fotledsstöd & SRX875 Stabilt Fotledsskydd

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Cm	19-20	20-21	21-23	23-25	25-27
Skostorlek	35-37	38-40	40-42	42-44	44-46



## EU8073/74 • Active Ankle T2

Ett ledat fotledsstöd tillverkat i formsprutad plast. Ger ett bra stöd lateralt och medialt under aktivitet. Foder tillverkat i PE-skum med slutna celler. Ett brett band runt fotleden gör appliceringen enkel. Används för laterala eller mediala ligamentskador i fotleden eller till kraftig instabilitet i fotleden. Kommer i svart eller vitt utförande. Universal.

EU8073 Active Ankle T2 Svart  
EU8074 Active Ankle T2 Vit

Storlek	Small	Medium	Large
Skostorlek	38-41	42-44	45-48



## Ultra Zoom Fotledsstöd

Ultra Zoom är vårt nya fotledsstöd för instabila fotleder. En ledad fotledsplatta tillsammans med kardborre-spänning ger en ortos som formar sig efter din fot med extra stabilitet.

Finns i två storlekar, måttet tas runt ankeln (häl-vrist)

85514323	S/M	35,5 cm och mindre
85514324	M/L	35,5 cm och mer

## MR5801 • AFO Dorsal Splint

AFO Dorsal Splint är en dorsalskena i polypropylenplast som vänder sig till patienter som lider av droppfot. Levereras med färdigmonterat kardborrband med vadpolstring samt justerbart fotledsband. Uttag i hälpartiet ger en bättre passform och gör att ortosen fungerar bra i skon. Kan formas och individanpassas med hjälp av varmluftpistol 180-200 °C för bättre passform. Placerar foten i neutralposition och motverkar droppfot. Finns i vänster- eller högerutförande.



## MR5800 • AFO Dorsal Splint utan band

Droppfotsskena utan appliceringsband går utmärkt att anpassa med flera av våra material som finns att köpa på rulle. Kontakta kundtjänst eller sök på hemsidan för mer information. Finns i vänster- eller högerutförande.



### MR5801/5800 AFO Dorsal Splint

Storlek	Small	Medium	Large
Skostorlek	34-37	38-41	42-45

## MR5700 • Malleum AFO

En formsprutad dorsalskena i Polyamidplast som vänder sig till personer med droppfot. Rundade kanter gör att den enkelt kan appliceras utan större anpassning. Levereras med färdigmonterat kardborrband med vadpolstring samt justerbart fotledsband vid behov. Kan justeras med varmluftspistol 180-200 °C, eller vid behov slipas. Finns i vänster- eller högerutförande.



### MR5700 Malleum AFO

Storlek	Small	Medium	Large	X-Large
Skostorlek	35-39	40-43	41-44	44-48



## MR5600 • Nattskena Fotled

Nattskena för fotled som har designats för att hålla fot och fotled i dorsalflexion nattetid för att behandla plantarfasciit eller hälseneproblem. Skenan är gjord i formsprutad Polypropylen för bästa stabilitet. Alla band framtill har separat polstring och är utrustade med snabbspännen för enkel applicering. Skenans klädsel är tillverkad av tryckavlastande PU-skum som är klädd med Lycra®. Kardborrbanden på sidan av skenan används för att ytterligare öka dorsalflexionen. Skenan har en EVA-sula undertill för att minska risken för att halka om brukaren behöver gå upp under natten.

### MR5600 Nattskena Fotled

Storlek	Small/Medium	Large/X-Large
Skostorlek	35-40	41-46



## NPF8 • Nattsocka för plantar fasciit

Plantar fasciit är ett smärtsamt tillstånd som kan ta flera månader att bli bra från. Kombinationen av biomekanisk korrigering med fotbädd för att avlasta plantarfascian tillsammans med stretching och excentrisk träning har visat sig vara ett effektivt sätt att minska smärtan.

Mediroyal NPF8® Nattsocka för Plantarfasciit har designats för att användas på natten för att sträcka på plantarfascian. Framtill på sockan finns ett band med kardborre som används för att justera foten i dorsalflexion. Upptill på sockan finns ett band med kardborre som används för att förhindra att sockan glider ner. Tåspetsen har ett anti-halk material så att brukaren kan belasta sockan säkert vid exempelvis toalettbesök under natten.

### NPF8 Nattsocka för plantar fasciit

Storlek	Small/Medium	Large/X-Large
Skostorlek	35-40	41-46

## MR5410 • Hallux Valgus Band

Hallux Valgus är vanligtvis ett smärtsamt tillstånd där stortån glider in mot de andra tårna och orsakar en svullnad över stortåns grundled.

Hallux Valgus bandet motverkar felställningen och bidrar till en rakare position av stortåns grundled både vid aktivitet, vila och sömn.

Universal storlek, skostorlek 35-46. Finns i vänster- eller högerutförande.







### **4300 • Kontrakturortos AC-Boot**

En smidig ortos för att förhindra kontrakturer och trycksår. Tillverkad i formsprutad HDPE-plast och fodrad med andningsaktivt Vel-Foam material för optimal hudkomfort. Ortosen är välpolstrad för att förhindra uppkomst av trycksår. Den appliceras enkelt med hjälp av två kardborrband. Baktill finns en antirotationsbar som kan fällas ut för att förhindra rotation. Om två ortoser används kan rotationsbaren sammankopplas med den andra ortosen. Sulan på ortosen är endast till för att kunna gå kortare sträckor i rummet. Sulan kan tas av vid behov.

4300 Kontrakturortos AC-Boot

Storlek      Small      Medium      Large

Skostorlek    35-39    40-43    43-46



## M70-100 • Pruventor

Pruventor är en ortos som kan användas för prevention och behandling av hälsår för sängliggande patienter. Den kan också användas vid redan uppkomna sår för att effektivt avlasta det tryckutsatta området. Den bakre delen för vaden är specialdesignad för att avlasta hälen effektivt. Häldelen är öppen för att minska risken för tryck men också för att snabbt kunna kontrollera hälstatus.

Över fotleden finns två kryssband som stabiliserar foten för att förhindra plantarflexion. Högst upp finns också ett extra stabiliserande band som kan appliceras vid behov. Den enkelt torkas av vid behov med alkohol eller vid grundligare rengöring tvättas i maskin 60° C. Ortosen är fylld med så kallad klusterfiber, ett nylonfiber som behåller sin form effektivt, även under långvarigt tryck. För att förhindra rotation kan den medföljande kilen appliceras med kardborre.

### M70-100 Pruventor

Storlek	Universal Lång	Universal Kort
Skostorlek	35-48	35-48



## MR3040 • Avlastningskudde för hälsår

En mycket effektiv ortos för hälsårsprofylax. Patienter som är sängliggande med dålig cirkulation lider stor risk för hälsår. Tillverkad i bomullsmaterial med fiberfillpolstring som är luftig och tryckavlastande. Bomullsband med kard-borre håller ortosen på plats. Kan tvättas i maskin 60° C. Säljs parvis.

### M3040 Avlastningskudde för hälsår

Storlek	Universal
Skostorlek	35-48



## M20050 • AFFIX Droppfotsortos

En mjuk droppfotsortos som hjälper till att placera foten i korrekt position vid gång. Ortosen är anpassad till skor med snörning. Genom ett elastiskt kardborreband kan du enkelt justera vinkeln på foten. En gelpelott är integrerad över hälsenan. Dess låga profil och fästningssystem i plösen minimerar risken för skav i skon.



## M20051 • AFFIX Framfotsband


Tillbehör: Denna ortos går även att användas utan skor genom ett tillbehörsband. Bandet lindas runt framfoten och har en krok där det elastiska kardborrebandet kan fästas. Finns i vänster- respektive högerutförande!

### M20050 AFFIX Droppfotsortos

Storlek	XS	S	M	L
Omkrets fotled cm	13-17	17-21	21-25	25-29

### M20051 AFFIX Framfotsband (HÖ eller VÄ)

Storlek	S	M	L
Framfotens Omkrets cm	17-21	21-25	25-27

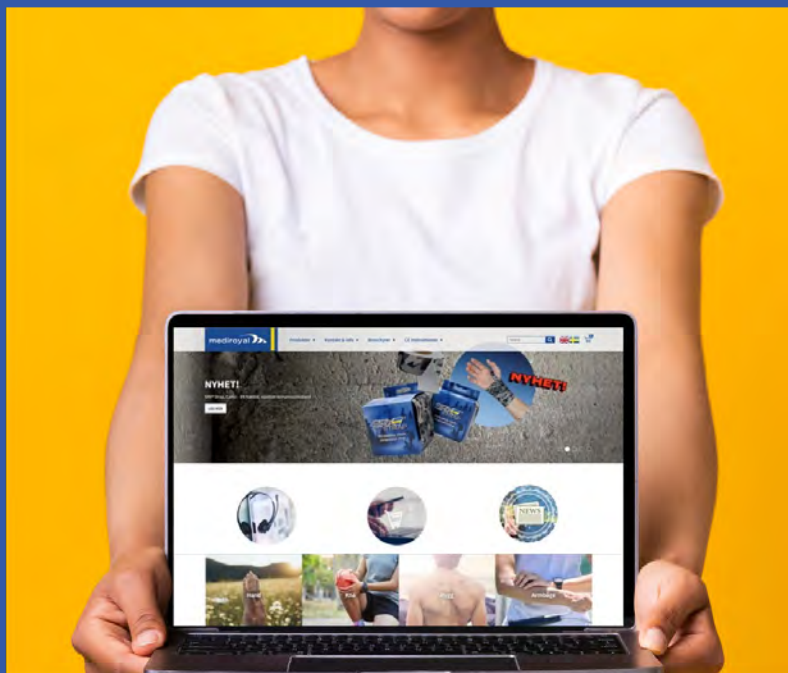

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[Instagram.com/mediroyal](https://www.instagram.com/mediroyal)  
[Facebook.com/mediroyalnordic](https://www.facebook.com/mediroyalnordic)