

mediroyal



HJÄLP FÖR RYGGAR



SRX840 • SRX® Ryggstöd

Detta ryggstöd är designat av 5 mm SRX® material som ger stöd och isolerar värmen över ländryggen. Insidan av materialet har Neptune laminerat vilket ger hög komfort och torkar snabbt. Kardborrestängningen framtill gör det enkelt att applicera och justera. Ryggstödet kan användas vid tillfällig smärta i ländryggen, överansträngning eller för att ge ett lätt stöd över ländryggen vid aktivitet.



SRX840 • SRX® Ryggstöd (omkretsmått runt midjan)

Storlek	S	M	L	XL	XXL
Cm	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



SRX841 • SRX® Ryggskydd Stabil

Detta ryggskydd är tillverkat av ventilerande elastiskt material med låg profil för att kunna användas både utanpå och under kläder. Baktill har skyddet plastskenor i slutna kanaler för att ge stöd till ländryggen. Insidan baktill har anti-glidmaterial för att förhindra att skyddet åker upp vid användning. Som extra stöd finns ett justerbart dragband fastsatt baktill och som fästs in framtill för att ge individuellt stöd och kompression. Ryggskyddet kan användas vid tillfällig smärta i ländryggen, överansträngning eller för att ge ett lätt stöd över ländryggen vid aktivitet.

Omkretsmått runt midjan



SRX841 • SRX® Ryggskydd Stabil

Storlek	S	M	L	XL
Cm	60-75	75-90	90-120	120-150



MR4920 • X-Rygg Låg 26 cm • Svart & Beige

Ett ryggskydd med individuellt kryssband baktill. Ryggskyddet har fyra fickor baktill; de två yttersta är stängda och har plasticskenor, de i mitten är öppna kanaler med stålskenor som kan justeras individuellt efter patienten. Det individuella kryssbandet är infäst i sidorna för att göra appliceringen enklare. Kryssbanden fästs framtill med kardborre.

Indikationer: akut eller kronisk lumbago, lumbosakral instabilitet, degenerativa sjukdomar och osteoporos.



MR4921 • X-Rygg Hög 32 cm • Svart & Beige

Ett bredare ryggskydd med samma funktioner och indikationer som X-Rygg Låg.



MR4920/4921 • X-Rygg Låg 26 cm / Hög 32 cm • Svart & Beige (omkrets midja)

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Cm	66-78	78-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125	125-138



MR4923 • X-Rygg Svängd 26 cm • Beige

Denna modell är mer svängd för att passa patienter med bredare höfter. Den svängda modellen ger ett mer lumbosakralt stöd och är bredare över höften och kan fästas vinklat framtill. Den har fyra skenfickor baktill, två är stängda och de två mittersta öppna. Levereras med både stål- och plasticskenor för att kunna ge ett individuellt val av stöd. Kryssbandet baktill kan justeras individuellt och fästs framtill. **Indikationer:** akut eller kronisk lumbago, lumbosakral instabilitet, degenerativa sjukdomar och osteoporos.

MR4923 • X-Rygg Svängd 26 cm • Beige

(omkretsmått midja)

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Cm	66-78	78-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125



MR4925 • Sacro X • Beige

Sacro-X är ett SI-leadsbälte med låg profil och ett extra stabiliseringsband som kan fästas på sidorna eller framtill. Bältet har designats för att ge ett bra lumbagosakralt stöd. Baktill finns två plasticskenor i öppna fickor och en lumbosakral pelott för extra stöd. Stabiliseringsbandet kan fästas in på sidorna eller framtill på bältet för extra stöd. **Indikationer:** SI-leadsinstabilitet och lumbosakral instabilitet.

MR4925 • Sacro X • Beige

(omkretsmått höft)

Storlek	S	M	L	XL	XXL
Cm	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115



MR4926 • Dorsum Flexi

Tvådelad modell tillverkad av ett ventilerande elastiskt material med låg profil, hög komfort och bra slitstyrka. Den två-delade stängningen gör att höjden framtill är flexibel, vilket gör modellen lämplig för personer med bred höft och smal midja eller en kraftigare buk. Baktill finns fyra stycken skenor i rostfritt fjäderstål som laminerats in i en bakre lumbal platta. De kan enkelt justeras direkt i plattan men kan inte tas ut.
Indikationer: akut eller kronisk lumbago, lumbosakral instabilitet, degenerativa sjukdomar och osteoporos.

(Omkretsmått midja)



MR4928 • CoTex Dorsum Stabil

En flatstickad ryggortos med hög kompression och stöd. Lämplig för personer med hög aktivitet. Stängningen framtill är förstärkt för att ge ett bättre bukstöd. Fyra justerbara skenor i fjäderstål i den bakre plattan. Högre kompression än normala rygg-gördlar.
Indikationer: akut eller kronisk lumbago, lumbosakral eller lumbal instabilitet, degenerativa sjukdomar och osteoporos

(Omkretsmått midja)

MR4926 • Dorsum Flexi/ MR4928 • CoTex Dorsum Stabil

Storlek	S	M	L	XL	XXL	3XL
Cm	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125



MR4922 • Posture • Svart & Beige

Mediroyal Posture är ett mycket funktionellt dynamiskt hållningsbandage för axlar och brösttrygg. De övre elastiska banden som kryssas i ryggen ger ett individuellt dynamiskt stöd beroende på hur kraftigt de justeras. De två plastskenorna baktill gör bandaget enklare att applicera. Två tryckavlastande hylsor medföljer för att minska trycket över axel och armhåla.

Indikationer: dålig hållning, smärtor i brösttrygg och axlar.



MR4922 • Posture

(omkrets brösttrygg)

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Cm	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115



EXT150 • EXTO Inter • Svart

EXTO Inter är baserad på EXTO Light med samma låga profil och enkla applicering med skillnaden att den har en stabil metallskena placerad över ryggraden. Den kan justeras individuellt till patienten. Skenfickan baktill är polstrad för att ge bra komfort och minska risken för tryck. EXTO Inter kan både användas för behandling av stabila kompressionsfrakturer men också som en interimsortos efter att frakturen läkt för att avlasta området och ge ett hållningsstöd.

Indikationer: stabila kotkompressioner i brösttryggen, kyfos eller hyperkyfos, mild skolios i brösttryggen i kombination med osteoporos eller efterbehandling av frakturer.



EXT150 • EXTO Inter • Svart

Storlek	Petite	Small	Standard
Höjd cm	145-170	170-190	170-190
Midjemått cm	60-80	60-80	80-110



EXT100/101 • EXT0 Light • Svart/Beige

Ett hållningsbandage med bra extensionsstöd som kan både hjälpa att korrigera, skydda samt reducera smärta. Mediroyal EXT0™ Light är enkelt att applicera med samma teknik som en ryggsäck. Designen har mönsterskyddats och består av flera olika delar med olika elasticitet. Materialet är tunt och andningsaktivt vilket gör det behagligt att bära och ger en låg profil. Över axlarna är materialet polstrat med microfleece för att undvika irritation. I bröstryggdelen finns en Y-formad del som ger en effektiv extensionseffekt. Den lägre gördeln fungerar som ett lättare ryggstöd och har silikonband på insidan för att förhindra att den glider. Axelbanden är monterade på ett nylonband med hög friktion som döljs av ett material. Det gör det enkelt att justera extensionsstödet individuellt utan att ha mycket kraft. Mediroyal EXT0™ Light har lågprofilhake som ger ett extra bra fäste mot materialet. Trots ett säkert fäste är det enkelt att öppna och för att göra det ännu enklare har alla hakband greppöglor. Mediroyal EXT0™ Light kan hjälpa dig att utföra de aktiviteter som du vill.

Indikationer: hållningsproblem i bröstrygg, bröstryggssmärta, thorakal kyfos, osteoporos.



EXT100/101 • EXT0 Light • Svart/Beige

Storlek	Barn	Petite	Small	Standard
Höjd cm	120-145	145-170	170-190	170-190
Midjemått cm	45-60	60-80	60-80	80-110



EXT200 • EXTO Stabil

EXTO™ Stabil är designad för att användas av patienter med kompressionsfrakturer på grund av osteoporos. Den kan också användas för patienter med kyfos och för att förbättra och stabilisera hållningen. Ryggortosen kan användas i de flesta aktiviteter för att korrigera, skydda och avlasta. Ortosen är tillvarkad av material som ger både hög komfort, polstring och funktion. Den består av tre delar; ryggördel, ryggdel och axelband. EXTO™ Stabil appliceras som en ryggsäck. Häng på de båda axelbanden, applicera därefter ryggördeln. Därefter justerar du stödet med sidodragbanden. Med EXTO™ Stabil kan du utföra de aktiviteter som du vill. Att hålla sig aktiv är den bästa medicinen för osteoporos. De flexibla justeringsmöjligheterna gör det nödvändigt att prova ortosen för att få den mest lämpliga storleken. En patient med kyfos har ofta en kortare kroppslängd än normalt. Detta gör ofta att en större storlek kan ge en bättre extensionseffekt på grund av den längre hävarmen.

EXT200 • EXTO Stabil

Storlek	S	M	L	XL
Kroppslängd cm	Upp till 165	165-180	180-195	180-195
Midjemått cm	75-95	85-105	95-115	105-130





SPQ100 • SpinoQuick® Standard

SpinoQuick® har ett unikt dynamiskt lågfriktionssystem som kräver lite handkraft för att ge en bra lumbal kompression. Systemet består av en nylonlina som tillsammans med en plastkonstruktion lumbalt gör utväxlingen av linan extremt effektiv. Det gör att endast en låg kraft behövs för att kunna ge ett bra lumbal stöd med dragbanden. Den lumbala delen på ortosen består av en plastpanel som integrerats i en ficka med dragkedja nedtill. Fickan är fastsatt på ortosen med tryckknappar vilket gör den enkel att öppna. Plastpanelen kan justeras med hjälp av en varmluftspistol vid behov.

Den främre stängningen har designats för att förenkla applicering för patienter med dålig handfunktion. Vardera av stängningsdelarna har förstärkts med en tunn PE-plast samt handtag för att göra hanteringen enklare. Det gör det enkelt att positionera händerna i handtagen och sedan stänga ortosen. Nylonlinan appliceras på framsidan genom två handtag som är tillverkade i lågprofilshake. Lågprofilhaken ger en säker applicering men ändå enkel att öppna.

Indikationer: lumbosakral eller instabilitet, ländryggssmärta, diskbräck, osteoartrit eller degenerativa sjukdomar.

SPQ100 • SpinoQuick Standard (omkretsmått midja)					
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Cm	73-81	81-89	89-97	97-105	105-113



SPQ101 • SpinoQuick® Stabil

Denna modell har samma design som SPQ100 men har en bredare och mer stabil ryggplatta. Ryggplattan täcker in hela ryggen och även på sidorna vilket ger ett mer stabilt stöd. Lämplig för patienter som behöver mer rotationskontroll och stöd. SpinoQuick® har ett unikt dynamiskt lågfriktionssystem som kräver mindre handstyrka men ändå ger en bra lumbal stabilitet. SpinoQuick®-systemet har en nylonlina med låg friktion som fästs in mellan två plattor baktill. Utväxlingen i systemet gör att friktionen är låg under hela justeringen vilket kräver minimal handstyrka.

Indikationer: post-operativt efter ländryggsfusion, lumbala kompressionsfrakturer, degenerativa förändringar, osteoporos, laminektomi, diskektomi, spondylos, spinal stenos eller lumbal instabilitet.

SPQ101 • SpinoQuick Stabil

(omkretsmått midja)

Storlek	S	M	L	XL	XXL
Cm	73-81	81-89	89-97	97-105	105-113



ABB365 • Maggördel 30 cm • Vit

En 30 cm hög elastisk maggördel i universalstorlek, tillverkad av nylon och polyester. Kardborreinfästningen är lång för att kunna täcka flera storlekar, stängningen framtill har vanlig hakkardborre. Ger en bra kompression och ett lättare stöd runt mage/rygg. Maggördlarna finns också i en lägre variant.

ABB366/367 • Maggördel 22 cm • Vit/Svart

22 cm hög (3-paneler) maggördel i både svart och vit färg.

Indikationer: Lätt kompression runt bålen efter operation.

Universal storlek: 68 - 120 cm



MR1353 • Maggördel Låg 20 cm • Vit


En lägre maggördel än ABB366/67 med samma funktioner och indikationer.

Finns i storleken 1 och 2.

Storlek: 1 = 60-95 cm

Storlek: 2 = 90-130 cm



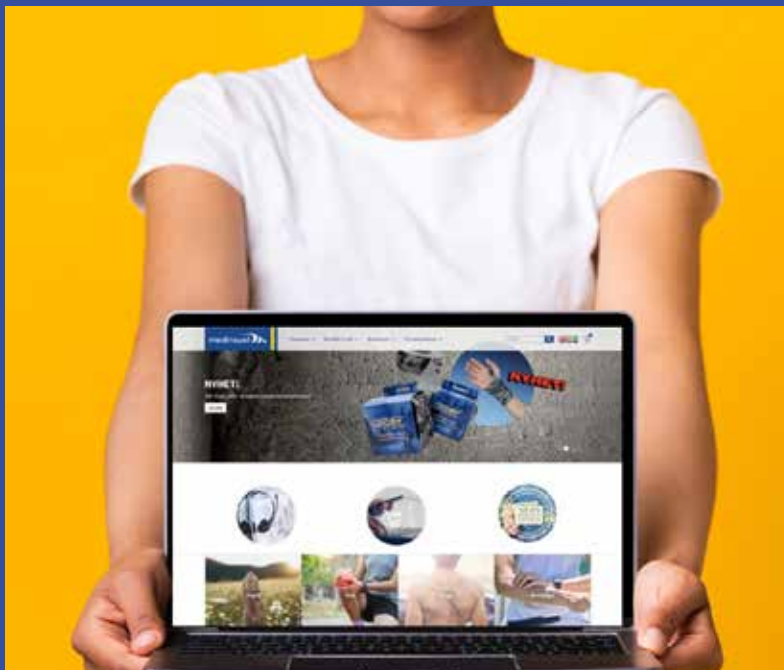

www.mediroyal.se
[Instagram.com/mediroyal](https://www.instagram.com/mediroyal)
[Facebook.com/mediroyalnordic](https://www.facebook.com/mediroyalnordic)



Scanna QR-koden för att komma till hemsidan