

mediroyal



**HJÄLP FÖR
FOT &
FOTLED**

Armist[™] Light Fotled är tillverkad av laminerat airmesh-material som ger bra ventilation och stabilitet. Externa stabiliseringsselement runt fotleden ger bra lateral och medial stabilitet. Boa[®] Closuresystemet har integrerats på ortosens baksida för att ge en lägre profil framtill. Systemet har en polymerbelagd stålvaajer som tillsammans med nylonguiderna på framsidan ger en oöverträffad stabilitet. För att öka greppet i ortosen på insidan har vi lagt till ett semielastiskt friktionsneopren under fotdelen. Materialet har en kardborrefunktion på ytan där extrabandet kan fästas för att ge individuellt stöd. Extrabandet som kryssas runt fotleden har designats för att fästas in över Boa[®]-systemet för att skydda det från stötar. Ortosen kan användas utan extrabandet om ett lättare stöd behövs. Universal.



MBA140 • Armist[™] Light Fotled (omkrets runt fotledsknölarna)

Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL
Cm	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26

Armist[™] fotled är tillverkad av ballistisk nylon med rip-stop funktion som klarar de allra mest krävande aktiviteterna. Armist[™] fotleden är utrustad med Boa[®] Closure System som gör applicering snabb, stabil och enkel. Systemet har en ytbehandlad stålvaajer som ger styrka och hållbarhet tillsammans med nylonöglorna och vaajer-guiderna i plast. Ortosen har en låg profil utan sömmar under foten och över hälsenan finns ett andningsaktivt och elastisk material. Den mediala och lateral stabiliteten kommer från de två plastskenor som finns integrerade på sidorna av ortosen. De individuella kryssbanden används för att ge extra stabilitet för fotleden. Universal.




MBA141 • Armist[™] Fotled (omkrets runt fotledsknölarna)

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Cm	16-18	18-20	20-22	22-24	24-28	28-32

MR5401 • CRX® Fotled

En fotledsortos med silikonpelotter för att ge optimal kompression över fotleden. Svullnad är en vanlig orsak till nedsatt ledrörlighet. CRX® fotled är tillverkad i ett speciellt material som ger hög kompression och stöd för fotleden. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Silikonpelotterna i kombination med kompressionen leder också till ökad receptivitet från leden. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i ortoserna skall de endast användas under aktivitet.

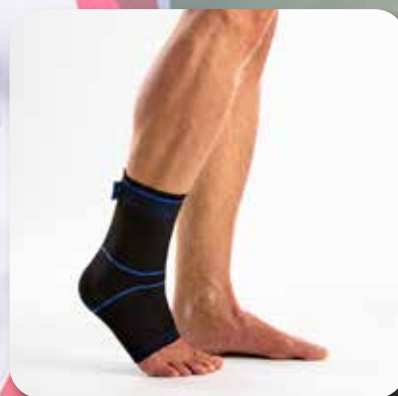

MR5402 • CRX® Ankel

En ortos som kombinerar kompression med extra stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög kompression över leden samt silikonpelotter. För extra stöd finns ett elastiskt kardborrband som kan appliceras individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i materialet skall ortosen endast användas under aktivitet.

Universal.

Storlek XS-XXL



MR5406 • CRX® Achillex

Ett fotledsbandage med kompression utvecklat för patienter med hälseneproblematik.

Bandet har tre olika kompressionszoner med den högsta kompressionen över fotleden. De två andra zonerna trappas ned gradvis över fotleden och underbenet. En silikonpelott är integrerad över hälsenan. Den ger kompression på sidan av senan för att avlasta och ta bort lokal svullnad.

I hälen finns en 8 mm hälkil integrerad, tillverkad av silikon, för att avlasta hälsenan. Ytterligare en hälkil följer med bandaget och kan användas tillsammans med bandaget för akuta hälseneproblem eller placeras på motstående fot för att undvika obalans.

Universal.

Storlek XS-XL



MR5401 • MR5402 • MR5406 (omkrets runt fotledsknölnarna)

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Cm	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

Vår elastiska fotled är ett enkelt men effektivt fotledsbandage som ger ett bra stöd för fotleden. Ortosen är tillverkad av ett nätkompressionsmaterial som tillsammans med kryssbanden ger en effektiv stabilisering och bra kompression över fotleden. Lämplig att bära i skor med lite plats.

MR5016 • Elastisk fotled (omkrets runt fotledsknölarna)

Storlek	XS	S	M	L	XL
Cm	35-37	37-39	40-43	44-46	46-



Ett elastiskt och mycket effektivt åttaband för fotleden. Bandet kan lindas individuellt och ger stöd efter behov. Tillverkad i tre storlekar som passar alla.

MR5001 • Elastiskt åttabandage

Storlek	S	M	L
Skostorlek	34-38	39-42	43-46





SRX872 • SRX® Universellt Elastiskt Fotledsstöd

Detta elastiska fotledsstöd är tillverkad av rundstickad elastisk textil med spiralelastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

Storlek Universal
Cm 18-24

omkretsmåttet tas runt fotledsknölarna



SRX871 • SRX® Fotledsstöd

Detta fotledsstöd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Materialet ger ett bra stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen lokalt över fotleden. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

Omkretsmåttet tas runt fotledsknölarna, se storleksguide



SRX875 • SRX® Stabilt Fotledsskydd

Detta stabila fotledsskydd med snörning är tillverkat av ballistiskt nylon med air-mesh på insidan. Över hälsenan finns ett elastiskt material placerat för att undvika tryck. Plösen är tillverkad av SRX®-material som är tryckavlastande. Nylonbanden på sidorna kryssas under foten och fästs på sidorna för att ge individuellt stöd. Det övre bandet upptill säkrar både nylondragbanden och snörningen. Fotledsskyddet kan användas för att ge ett mekaniskt stöd och stabilitet över fotleden efter lättare till måttliga stukningar eller för att stödja en instabil fotled under aktivitet.

Omkretsmåttet tas runt fotledsknölarna, se storleksguide

SRX872 • SRX871 • SRX875

Storlek	XS	S	M	L	XL
Cm	19-20	20-21	21-23	23-25	25-27
Skostorlek	35-37	38-40	40-42	42-44	44-46



EU8073/74 • Active Ankle T2 Svart/Vit

Ett ledat fotledsstöd tillverkat i formsprutad plast. Ger ett bra stöd lateralt och medialt under aktivitet. Foder tillverkat i PE-skum med slutna celler. Ett brett band runt fotleden gör appliceringen enkel. Används för laterala eller mediala ligamentskador i fotleden eller till kraftig instabilitet i fotleden. Kommer i svart eller vitt utförande. Universal.

EU8073/EU8074 • Active Ankle T2 Svart/Vit

Storlek	S	M	L
Skostorlek	38-41	42-44	45-48



Ultra Zoom Fotledsstöd

Ultra Zoom är vårt nya fotledsstöd för instabila fotleder.

En ledad fotledsplatta tillsammans med kardborre-spänning ger en ortos som formar sig efter din fot med extra stabilitet.

Användningsområden

- Idrottare med risk för fotledsskador (inom fotboll, handboll, volleyboll, basket etc)
- Du som vandrar i ojämn terräng
- Individer som behöver lite mer fotledsstöd för sin dagliga aktivitet (inte nödvändigtvis sportrelaterat)

Omkretsmåttet tas runt ankeln, häl-vrist



Ultra Zoom Fotledsstöd

85514323	S/M	35,5 cm och mindre
85514324	M/L	35,5 cm och mer

MR5801 • AFO Dorsal Splint

AFO Dorsal Splint är en dorsalskena i polypropylenplast. Levereras med färdigmonterat kardborrband med vadpolstring samt justerbart fotledsband. Uttag i hälpartiet ger en bättre passform och gör att ortosen fungerar bra i skon. Kan formas och individanpassas med hjälp av värme för bättre passform. Placerar foten i neutralposition och motverkar droppfot.

Finns i vänster- eller högerutförande.



MR5800 • AFO Dorsal Splint utan band

Droppfotsskena utan appliceringsband som går utmärkt att anpassa med flera av våra material som finns att köpa på rulle.

Kontakta kundtjänst eller sök på hemsidan för mer information.

Finns i vänster- eller högerutförande.



MR5801/MR5800 • AFO Dorsal Splint

Storlek	S	M	L
Skostorlek	34-37	38-41	42-45



MR5700 • Malleum AFO

En formsprutad dorsalskena i Polyamidplast som vänder sig till personer med droppfot. Rundade kanter gör att den enkelt kan appliceras utan större anpassning. Levereras med färdigmonterat kardborrband med vadpolstring samt justerbart fotledsband vid behov. Kan justeras med varmluftspistol 180-200° C, och vid behov slipas. Finns i vänster- eller högerutförande.

MR5700 • Malleum AFO

Storlek	S	M	L	XL
Skostorlek	35-39	40-43	41-44	44-48



M20050 • AFFIX Droppfotsortos

En mjuk droppfotsortos som hjälper till att placera foten i korrekt position vid gång. Ortosen är anpassad till skor med snörning. Genom ett elastiskt kardborreband kan du enkelt justera vinkeln på foten. En gelpelott är integrerad över hälsenan. Dess låga profil och fästningssystem i plösen minimerar risken för skav i skon.

Omkretsmått runt fotleden.

M20050 • AFFIX Droppfotsortos

Storlek	XS	S	M	L
Fotledens omkrets cm	13-17	17-21	21-25	25-29

M20051 • AFFIX Framfotsband

Tillbehör: Denna ortos går även att användas utan skor genom ett tillbehörsband. Bandet lindas runt framfoten och har en krok där det elastiska kardborrebandet kan fästas. Finns i vänster- respektive högerutförande!



M20051 • AFFIX Framfotsband (Tillbehör)

Storlek	S	M	L
Framfotens omkrets cm	17-21	21-25	25-27

ORTHOSERVICE
RO-TEN



PF8 • Strumpa för hälsporre

En unik kompressionsstrumpa som avlastar vid hälsporre, plantar fasciit och uttrampad hälkudde. Åtta zoner skapar riktad kompression runt fot, häl och vrist. Produkten fungerar som komplement till tejpning.

Storlek: S-L



APF8 • Active strumpa för hälsporre

En vidareutveckling av den populära PF8-strumpan, anpassad för idrott och motion. Modellen har förstärkt kompression i PF-zonen för extra stöd vid högre belastning. Produkten fungerar som komplement till tejpning.

Storlek: S-L



NPF8 • Nattsocka för plantarfasciit

Nattstrumpa för plantar fasciit och hälsporre som sträcker senspegeln under foten under natten. Den främjar korrekt läkning och motverkar morgonsmärta och gångsättningsproblem.

Storlek: S/M-L/XL (35-40 - 41-46)



MR5410 • Hallux Valgus Band

Hallux Valgus bandet motverkar felställningar och bidrar till en rakare position av sortåns grundled både vid aktivitet, vila och sömn.

Universal storlek, skostorlek 35-46. Finns i vänster- eller högerutförande.



MR5600 • Nattskena Fotled

Nattskena för fotled har designats för att hålla fot och fotled i dorsalflexion nattetid för att behandla plantarfasciit eller hälseneproblem. Skenan är gjord i formsprutad Polypropylen för bästa stabilitet. Alla band framtill har separat postring och är utrustade med snabbspännen för enkel applicering. Skenans klädsel är tillverkad av tryckavlastande PU-skum som är klädd med Lycra®. Kardborrbanden på sidan av skenan används för att ytterligare öka dorsalflexionen. Skenan har en anti halsula undertill för att minska risken för att halka om patienten behöver gå upp under natten.

Storlek: S/M-L/XL (35-40 - 41-46)



4300 • Kontrakturortos AC-Boot

En smidig ortos för att förhindra kontrakturer och trycksår. Tillverkad i formsprutad HDPE-plast och fodrad med andningsaktivt Vel-Foam material för optimal hudkomfort. Ortosen är välpolstrad för att förhindra uppkomst av trycksår. Den appliceras enkelt med hjälp av två kardborrband. Baktill finns en antirotationsbar som kan fällas ut för att förhindra rotation. Om två ortoser används kan dessa sammankopplas med hjälp av dessa. Sulan på ortosen är endast till för att kunna gå kortare sträckor i rummet. Sulan kan tas av vid behov.

4300 • Kontrakturortos AC-Boot

Storlek	S	M	L
Skostorlek	35-39	40-43	43-46





M70-100L /100S • Pruvmentor Universal Lång & Kort

Pruvmentor är en ortos som kan användas för prevention och behandling av hälsår för sängliggande patienter. Den kan också användas vid redan uppkomna sår för att effektivt avlasta det tryckutsatta området. Den bakre delen för vaden är specialdesignad för att avlasta hälen effektivt. Håldelen är öppen för att minska risken för tryck men också för att snabbt kunna kontrollera hälstatus.

Över fotleden finns två kryssband som stabiliserar foten för att förhindra plantarflexion. Högst upp finns också ett extra stabiliserande band som kan appliceras vid behov. Överdraget är tillverkat av en barriärtextil som ger hög komfort och förhindrar att vätska tränger in i ortosen. Den kan enkelt torkas av vid behov med alkohol eller vid grundligare rengöring tvättas i maskin 60° C. Ortosen är fylld med så kallad klusterfiber, ett nylonfiber som behåller sin form effektivt, även under långvarigt tryck. För att förhindra rotation kan den medföljande kilen appliceras med kardborre. Den hjälper då till att stabilisera och förhindra rotation.

Storlek	Universal Lång	Universal Kort
Skostorlek	35-48	35-48



MR3040 • Avlastningskudde för hälsår

Denna avlastningskudde är en effektiv ortos för hälsårsprofylax. Patienter som är sängliggande med dålig cirkulation lider stor risk för hälsår. Tillverkad i bomullsmaterial med fiberfillpolstring som är luftig och tryckavlastande. Bomullsband med kardborre håller ortosen på plats. Kan tvättas i maskin 60° C.

Säljs parvis.

Universal storlek (skostorlek 35-48).



M550N • Airstep Tight Walker • M560N Airstep kort

Egenskaper

- Förstärkta skal på fram- och baksidan för ökad stabilitet
- Uppblåsbara luftkuddar för optimal passform mot benet och förbättrad stabilitet
- Konstruktion i lätt, robust plast; änddel i gummiliknande material
- Inbyggd pump för att blåsa upp/tömna cellerna
- Sula i halkfritt material
- Valfri vaddering för ytterligare anpassning till benet

Indikationer:

- Konservativ och postoperativ behandling av frakturer i fot/vrist och ben
- Allvarlig benförskjutning grad 1 till 3
- Konservativ behandling efter bristning i hälsenan
- Postoperativ behandling efter tenorrafi av hälsenan
- Pre- och postoperativ/posttraumatisk immobilisering

Den korta varianten används på patienter med kortare ben.

Storlek	S	M	L	XL
Skostorlek	35-39	39-44	44-47	>47



M501 • Kilar för Airstep Walkers

Hälskilar är avsedda för postoperativ behandling av akillessenrekonstruktion. De kan användas direkt efter behandlingen. Ett set innehåller 5 kilar i olika storlekar. Finns i höger- respektive vänsterutförande.

Take care feel better

M23001 • Postoperativ sko

Sulan

- Den fyrkantiga tådesignen fungerar som en stötdämpare som skyddar tårna
- Halkfri sula
- Den uttagbara EVA-innersulan kan anpassas eller bytas ut vid behov
- Den styva sulan minskar trycket på hälen och framfoten
- Den rockerformade sulan underlättar rullningen när du går

Ovandelen

- Lätt och andningsaktiv
- Hälkappa för ökad stabilitet i hälområdet
- Öppnas helt, så den är alltid snabb och enkel att ta på
- Kardborreband över vristen med en fyrkantig D-ring och skyddande vadder
- Spännfri symmetrisk knäppning över framfoten
- Låg profil, ingen höjdkompensation behövs för det motsatta benet
- Indikationer: För fötter som behöver stabilitet och avlastning efter operation (t.ex. osteotomi av foten, hallux valgus etc.).



Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL
Skostorlek	34-36,5	37-38,5	39-41	41,5-43	43,5-45	45,5-47



M23002 • Framfotsavlastande sko

Skillnaden mellan den postoperativa skon och framfotavlastande skon är att sulan har en 15° kil som avlastar trycket från framfoten. I övrigt är materialen och egenskaperna desamma.

Indikationer: En postoperativ sko utformad för att avlasta trycket från framfoten.

Storlek	XS	S	M	L	XL
Skostorlek	33,5-37	37,5-39,5	40-41,5	42-44	44,5-47



Diabetessko Wound-Class Modell Saluped

- Stabilisering över ankeln
- Sömlös insida
- Förstyvad roll-off sula
- Hygienisk och desinficerbar
- Generös inre volym för tryckavlastande åtgärder
- 3-zons avlastningssula
- Individuellt anpassningsbar

Fördelar:

- Perfekt komplement till sårbehandlingar på fotkliniker
- Enkel att justera och snabb att ta av och på
- Konsekvent tryckavlastning
- Stöds av studier på fotkliniker i öppenvård

Kontakta kundtjänst för mer information
Mejl: info@mediroyal.se
Telefon: 08 506 766 00

mediroyal



Orthoses are our passion



Scanna QR-koden för att komma till hemsidan

Mediroyal Nordic AB

Box 7052. Staffans väg 6B • SE-192 07 Sollentuna. Sweden

info@mediroyal.se • www.mediroyal.se