



mediroyal 

Orthoses are our passion

**ERIX<sup>®</sup>**  
**sports**  
by mediroyal

**Multifunktionsaxel**



# ErixSports® Multifunktionsaxel

ErixSports® är en ny multifunktionsaxel för idrottsaktiviteter som ger funktionellt stöd och individuellt justerbar stabilitet till axelleden. Ortosen har en anatomisk design för att stabilisera och säkra axelleden och för att förhindra anterior sublaxation.

Ortosen har en externt laminerad förstärkning som ger stöd och stabilitet utan att störa axelledens rörlighet. På insidan finns friktionsytor som ökar proprioceptionen och minskar risken för att ortosen rör sig. Insidan på materialet har Neptune™ Sky som ger optimal ventilation och en kylande effekt vid aktivitet.

För ytterligare stöd finns två olika band, ett dynamiskt och ett statiskt, som ger möjlighet att kontrollera rörelseomfång, öka stabiliteten och anpassa ortosen individuellt beroende på aktiviteten.




## Förstärkning med termoplast

Armdelen är försedd med ett ankare, som är en termoplastisk förstärkning, som fungerar som en infästningspunkt för bandsystemet och ger ökad stabilitet och förbättrad kontroll av rörelseomfånget. Termoplasten kan formas för hand för en individuell passform – vilket ger större precision och högre stabilitet och kontroll.

## Rotationsspänne


På stängningssystemet finns ett spänne som kan rotera för att följa rörelsen i aktiviteten. Detta gör appliceringen enkel och bandets längd kan justeras individuellt. Spännet och bandet är fäst vid ett flexibelt NRX® Strap-material som säkrar axeln i ett bakre säkert läge och ger stöd åt axeln för att förhindra anterior sublaxation.



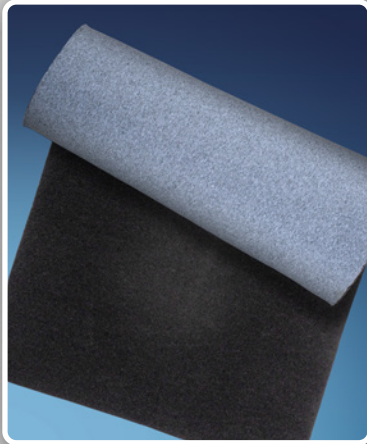

## Neptune™ Sky

ErixSports® axelortos har fodrats med det nya Neptune™ Sky-materialet som ger bättre fukttransport och en kylande effekt på huden, vilket gör komforten utmärkt vid längre användning.

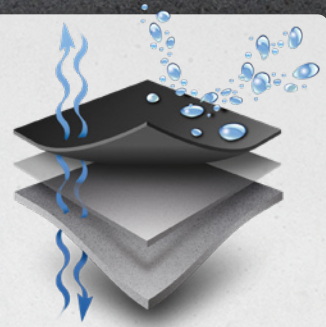

## Friktionsytor

På insidan av stödet finns friktionsytor för ökad proprioception och biofeedback. Friktionsytan fixerar ortosen över leden, vilket gör den optimal för sport och andra högintensiva aktiviteter där ökad stabilitet behövs.

## Dynamiska och statiska band

För att ytterligare utöka funktionaliteten hos ErixSports® ingår två extraband, ett statiskt och ett dynamiskt. Det statiska bandet ger hög stabilitet medan det dynamiska bandet ger dynamiskt stöd och kontroll.

De två banden ger en unik möjlighet att förstärka och anpassa stödet individuellt. De kan användas för att ge ytterligare stöd vid abduction/adduktion och extension/flexion av axelleden. Bandet appliceras på ortosens baksida och fästs med en integrerad hake.

Bandet kan appliceras under eller över armen och fästas på framsidan och över termoplastdelen för att ytterligare ge ett anpassat stöd efter individuellt behov.





## Design med multifunktion


Den unika funktionella designen möjliggör individuell justering och anpassning av stödnivån och stabiliteten, skräddarsydd efter varje användares specifika behov.

Den uppgraderingsbara designen gör att stödet enkelt kan anpassas individuellt, beroende på individens aktivitet och behov.

*ErixSports® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Nordic AB. ErixSports® är mönsterskyddad i EU.*

### Storlekstabell

NRX970 · ErixSports® Multifunktionsaxel · Ortosen finns i höger respektive vänsterutförande.

Storlek	XS	S	M	L	XL	
Omkrätsmått biceps cm	23-27	27-32	32-35	35-38	38-42	

*Måttet tas som omkrätsmått runt bicepsmuskeln. Bröstsbandet är justerbart.*

Orthoses are our passion

**mediroyal** 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna, Sweden  
Tel 08-506 766 00 · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Mediroyal Asia Pacific Co. Ltd.

Unit A10, 20F., No. 282, Shizheng N. 2nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)  
+886-4-2254-8069 · sales.mediroyal@gmail.com · www.mediroyal.se/en