



mediroyal 

Orthoses are our passion


# Mediroyal Tekniska Textiler



# Tekniska och innovativa textilier från Mediroyal

Mediroyal har i många år investerat i att ta fram nya tekniska textilier. Detta har lett till många nya material som Ventus™, Neptune™, ARX® och NRX®. I denna broschyr introducerar vi vår nyaste innovation; I-ARX® och P-ARX® som är ett system av polstringsmaterial som inte behöver kardborre för att fästa i ortoser. Nu finns många av våra textilmaterial vi använder i vår serieproduktion också som råmaterial.

Vi tillverkar materialen själva i vår produktionsanläggning i Taiwan som är ISO9001/14001 certifierad. För att förenkla hantering och transport har vi tagit fram ett eget standardmått för materialen som är 58 cm brett x 1 meter långt. Vi har också tagit fram en specialförpackning för dessa material i form av ett papprör med skruvlock. Det gör det enkelt att transportera och förvara materialet. Röret skyddar också materialet vid lagring. De flesta material kan också köpas i helark eller som löpmeter. För att ortoser är vår passion!

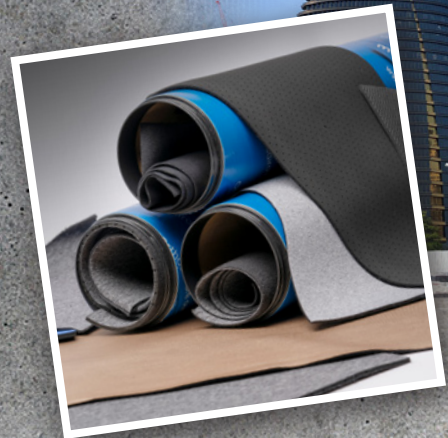

## Mediroyal Sharkskin Neopren · 3 mm Sharkskin/Svart Nylon

Detta material är tillverkat av 100 % CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). Materialet är laminerat med svart nylonjersey på ena sidan och neopren Sharkskin på den andra sidan. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Detta material har en hög elasticitet och en hudfriktion på sharkskin-sidan vilket gör det lämpligt för ortoser som behöver ha en bra kompression och ett bra grepp mot huden.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490003	3 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:

Art.nr	Tjocklek	Mått
EU490003-S	3 mm*	125 x 318 cm



\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid. Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
99% CR-skum, 1% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

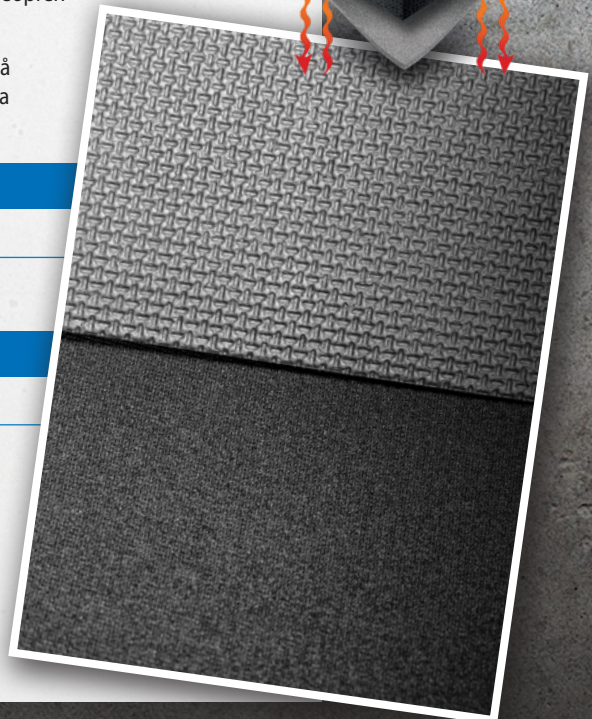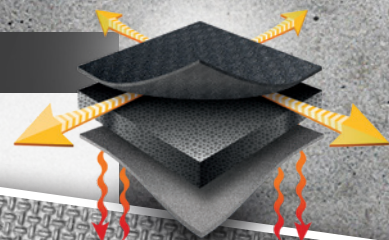

## Mediroyal Neopren med Kardborretextil/Svart Nylon

Detta material är tillverkat av 100% CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). Materialet är laminerat med elastiskt kardborretyg på ovsidan och svart nylonjersey på insidan. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Detta material har en hög elasticitet och kardborretyg på ovsidan som gör det lämpligt för ortoskonstruktioner utan att behöva sy på fästpunkter för mjuk kardborre. De flesta hakband är kompatibla mot kardborretyget. Materialet kan också användas som ett utbytbart polstringsmaterial genom att applicera självhäftande hake på insidan av ortosen. EU445060 NRX® Lågprofilhake är en lämplig kardborre för den applikationen. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490101	1 mm	58 cm	100 cm
EU490103	3 mm	58 cm	100 cm
EU490105	5 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:



Art.nr	Tjocklek	Mått
EU490101-S	1 mm	125 x 318 cm
EU490103-S	3 mm	125 x 318 cm
EU490105-S	5 mm	125 x 318 cm



Materialkomposition:  
97% CR-skum, 2% Polyamid, 1% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

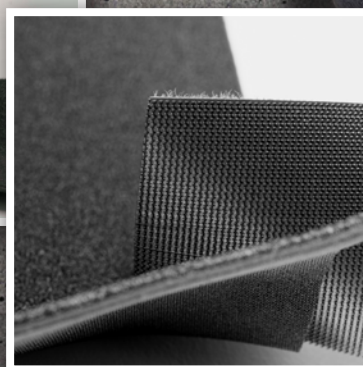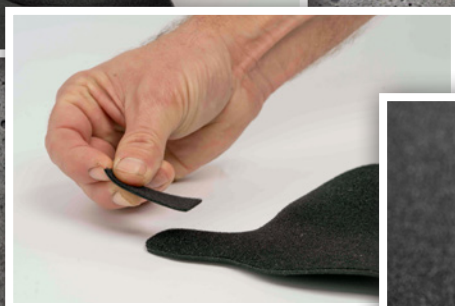

## Mediroyal Neopren med Svart Nylon på båda sidor

Detta material är tillverkat av 100% CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). Materialet är laminerat med svart nylonjersey på båda sidorna. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Detta material har en hög elasticitet och kan användas för de flesta ortoskonstruktioner. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490201	1 mm	58 cm	100 cm
EU490203	3 mm	58 cm	100 cm
EU490205	5 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:



Art.nr	Tjocklek	Mått
EU490201-S	1 mm	125 x 318 cm
EU490203-S	3 mm	125 x 318 cm
EU490205-S	5 mm	125 x 318 cm



Materialkomposition:  
98% CR-skum, 2% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

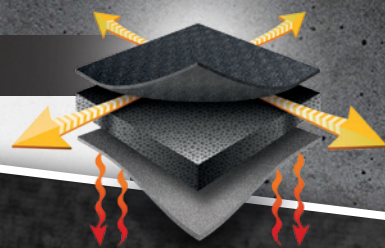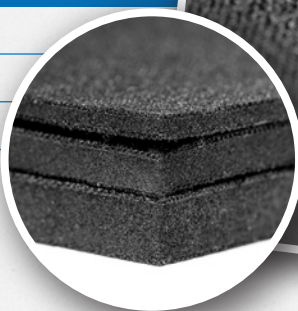

## Mediroyal Neopren med Royal Blue Nylon/Svart Nylon

Detta material är tillverkat av 100% CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). Materialet är laminerat med nylonjersey på båda sidorna. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Detta material har en hög elasticitet och kan användas för de flesta ortoskonstruktioner. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490301	1 mm	58 cm	100 cm
EU490303	3 mm	58 cm	100 cm
EU490305	5 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:

Art.nr	Tjocklek	Mått
EU490301-S	1 mm*	125 x 318 cm
EU490303-S	3 mm*	125 x 318 cm
EU490305-S	5 mm*	125 x 318 cm


\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
98% CR-skum, 2% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

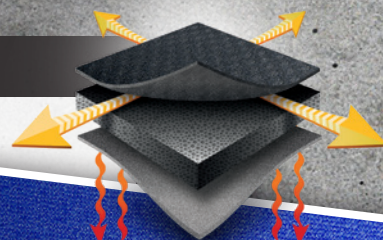

## Mediroyal NRX® Strap Material

Detta är vårt populära NRX® Strap material som är tillverkat av 100% CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). Materialet är microperorerat för maximal ventilation. Ovansidan har ett elastiskt kardborretyg och insidan microperorerat CR-skum för hudfriktion. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Materialet har en hög elasticitet och hudfriktion på insidan och kan användas för ortoskonstruktioner där proprioceptisk funktion behövs. Materialet kan klippas utan att repa upp sig och det elastiska kardborretyget är kompatibelt mot de flesta hak-kardborrar. Materialet kan också användas som ett utbytbart polstringsmaterial med friktionseffekt genom att applicera självhäftande hake på insidan av ortosen. EU445060 NRX® Lågprofilhake är en lämplig kardborre för den applikationen. Materialet kan också appliceras på band för att förhindra att ortoser glider.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU446601	1 mm	58 cm	100 cm
EU446603	3 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:



Art.nr	Tjocklek	Mått
EU446900	1 mm	125 x 318 cm
EU446603-S	3 mm	125 x 318 cm



Materialkomposition:  
98% CR-skum, 2% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

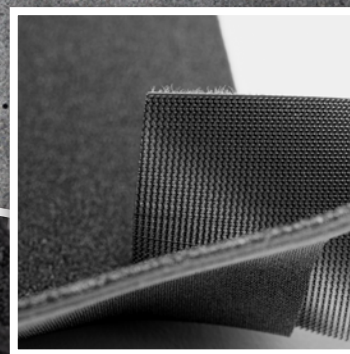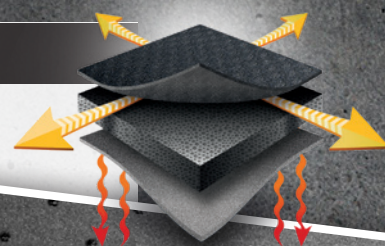

## Mediroyal NRX® Strap Double

Detta är vårt populära NRX® Strap Double-material som är tillverkat av 100% CR-skum med 12 graders densitet (Shore Typ A). CR-skummet är microperorerat för maximal ventilation. Det elastiska kardborretyget är laminerat på båda sidorna. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Detta material har en hög elasticitet och en bra stabilitet. Materialet kan klippas utan att repa upp och kardborretyget är kompatibelt med de flesta hak-kardborrar.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU447602	3 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:

Art.nr	Tjocklek	Mått
EU447602-S	3 mm*	125 x 318 cm


\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid. Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
98% CR-skum, 2% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

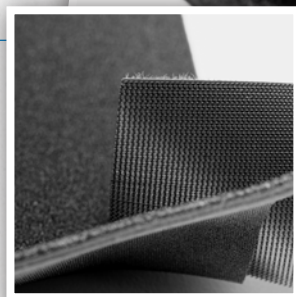

## Mediroyal NRX® Strap Neptune™ Material

NRX® Strap Neptune™ materialet har en 1 mm perforerad CR-skumkärna som lamineras med ett lågprofilkardborretyg på ovsidan och Neptune™ textil på insidan. Neptune™ är ett hydrodynamiskt material med aktiv fuktttransport som också torkar snabbt.

**Lämpligt för:** Kan användas som en tunn polstring i de flesta ortoser tillsammans med självhäftande hakkardborre. Materialet har en bra tryckavlastning i kombination med ventilation och aktiv fuktttransport.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU452900	2 mm	58 cm	100 cm



Materialkomposition:  
80% CR-skum, 10% Polyamid, 10% Nylon



Tvättråd:  
60° C maskintvätt



## Mediroyal ARX® Spacer Material

ARX® tredimensionella textil används i de flesta av våra ARX® produkter för knä och tumme. Vi har utvecklat detta som ett ventilerande alternativ till neopren. Ytorna på materialet är hudvänligt och polyesterkärnan i materialet har en tryckavlastande effekt. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** ARX®-materialet kan användas för många olika ortosapplikationer. Materialet har en tryckavlastande funktion i kombination med bra kompression och hög ventilation.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490500	4 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490500-M	4 mm*	130 cm


\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris..



Materialkomposition:  
75% Polyester, 20% Polyamid, 5% Spandex



Tvättråd:  
40° C maskintvätt

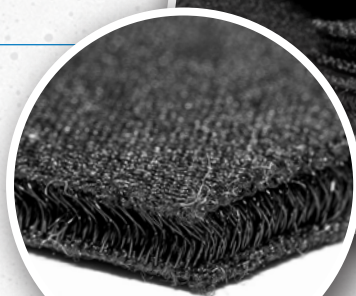

## Mediroyal ARX® Spacer Material med mjukt kardborretyg på ena sidan

Detta material är ARX® Spacer material som lamineras på ena sidan med kardborretextil, vilket gör att det fäster mot hakkardborre. Det kan användas som polstring i ortoser genom att applicera hakkardborre på insidan. Materialet är ventilerande, semi-elastiskt och tryckavlastande.

**Lämpligt för:** Kan användas som polstring i de flesta ortoser tillsammans med lågprofilhake. Materialet har bra tryckavlastning och ventilation.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490501	5 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490501-M	5 mm	130 cm



Materialkomposition:  
80% Polyester, 15% Polyamid, 5% Spandex



Tvättråd:  
40° C maskintvätt



## Mediroyal Ventus™ Material · Svart Lycra/Svart Fleece

Ventus™-materialet används i flera av våra ortoser. Materialet har en ovansida som är Lycra med ett andningsaktivt membran. Insidan har en micro-fleece tillverkad av polyester. Ventus™-materialet har en hög komfort och en bra andningsförmåga. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Ventus™-materialet kan användas för de flesta ortoskonstruktioner där hög komfort och andningsaktivitet behövs. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490400	1,8 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490400-M	1,8 mm*	140 cm


\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
50% Polyester, 45% Nylon, 5% TPU



Tvättråd:  
40° C maskintvätt

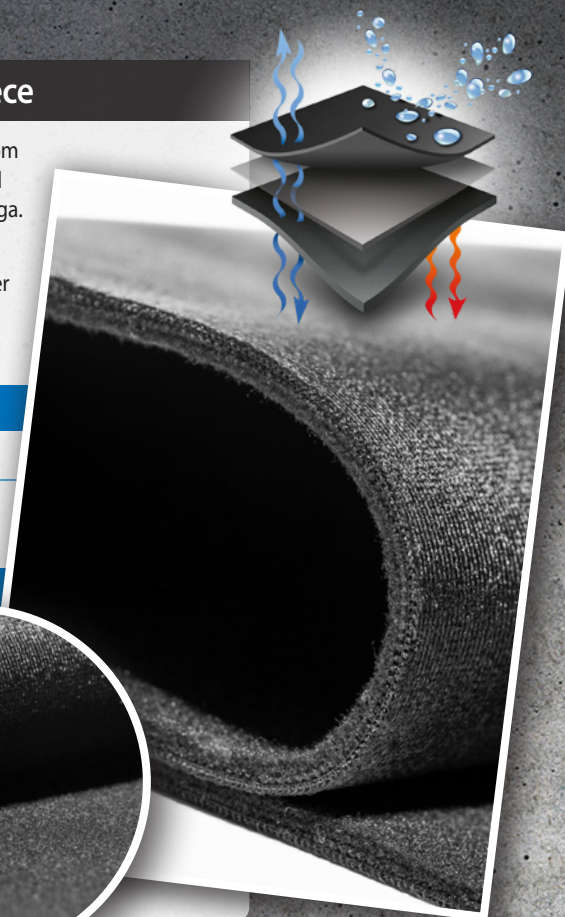

## Mediroyal Ventus™ Material · Beige Lycra/Svart Fleece

Ventus™-materialet används i flera av våra ortoser. Materialet har en ovansida som är Lycra med ett andningsaktivt membran. Insidan har en micro-fleece tillverkad av polyester. Ventus™-materialet har en hög komfort och en bra andningsförmåga. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Ventus™-materialet kan användas för de flesta ortoskonstruktioner där hög komfort och andningsaktivitet behövs. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490401	1,8 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490401-M	1,8 mm*	140 cm

\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
50% Polyester, 45% Nylon, 5% TPU



Tvättråd:  
40° C maskintvätt



## Mediroyal Neptune™ Material med Svart kardborretyg/ Neptune™ Textil

Mediroyals Neptune™-material utvecklades 2015. Det är ett hydrodynamiskt material med en andningsaktivitet men som också torkar snabbt. Det används för våra Proxi®, RESTO® och Exto® Inter-produkter. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Neptune™-materialet kan användas för de flesta ortosapplikationer där hög komfort, andningsaktivitet och ett snabbt torkande material behövs. Materialet kan klippas utan att repa upp sig.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490403	1,6 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490403-M	1,6 mm*	140 cm

\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
50% Polyester, 45% Nylon, 5% TPU



Tvättråd:  
40° C maskintvätt



Kardborrekompatibel

## Mediroyal Neptune™ Material · Svart Lycra/Neptune™ Textil

Mediroyals Neptune™-material utvecklades 2015. Det är ett hydrodynamiskt material med en andningsaktivitet men som också torkar snabbt. Det används för våra Proxi®, RESTO® och Exto® Inter-produkter. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Neptune™-materialet kan användas för de flesta ortosapplikationer där hög komfort, andningsaktivitet och ett snabbt torkande material behövs. Materialet kan klippas utan att repa upp.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU490404	1,2 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:

Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU490404-M	1,2 mm*	140 cm

\* Artikeln är order mot order med längre leveranstid.  
Kontakta kundtjänst för mer information och pris.



Materialkomposition:  
50% Polyester, 45% Nylon, 5% TPU



Tvättråd:  
40° C maskintvätt



# I-ARX® & P-ARX®

## – Den nya generationens polstring för ortoser

Mediroyal har utvecklat ett nytt system för att polstra ortoser som inte kräver konventionell kardborre för att fästa in polstringen. Istället har vi utvecklat samma teknologi som vi använder i ARX® Strap som är baserad på microfiber som fäster mot sig självt. Det gör det möjligt att laminera eller limma I-ARX® Innertyg på insidan av ortosen och sedan använda P-ARX® polstringen som fäster mot textilytan. Polstringen kan tas av enkelt för att kunna tvätta den i 60° C och sedan återapplicera den.



### I-ARX® Innertyg

Detta Innertyg är tillverkat av microfiber med en PU-film på baksidan. Innertyget är elastiskt och kan appliceras på insidan av ortosen genom antingen laminering, självinfästning från termoplast eller genom kontaktlim. I-ARX® innertyget fästs permanent i ortosen och P-ARX® polstringen appliceras sedan mot I-ARX® ytan. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Innertyg på insidan av ortoskonstruktionen för att sedan kunna fästa P-ARX® eller SRX® postringen mot. Fungerar utmärkt för inlägg, frakturortoser, spinala ortoser, knäortoser eller större handledsskenor.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU458101	0,15 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:


Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU458101-M	0,15 mm	140 cm



Materialkomposition:  
95% Polyamid, 5% TPU



Tvättråd:  
När tyget är infäst i ortosen rekommenderar vi handtvätt med mildt tvättmedel.

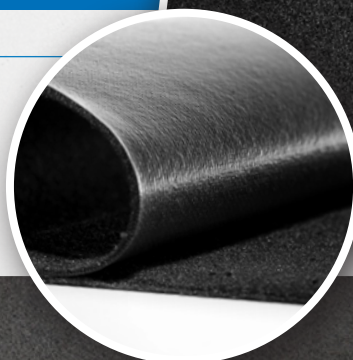

## P-ARX® Neptune™ Tunn polstring

Detta är en tunn polstring som kan appliceras i ortoser som har begränsad plats. Polstringen är tillverkad av Neptune™ som är ytan mot huden. Neptune™ är andningsaktivt och hydrodynamiskt vilket gör att det torkar snabbt. Undersidan har samma microfiber som finns i ARX® Strap och som fäster mot I-ARX® Innertyget EU458101 utan kardborre. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Polstring på inlägg, frakturortoser, spinal ortoser, knäortoser eller stora handskenor..

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU458201	1,8 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som löpmeter:


Art.nr	Tjocklek	Bredd
EU458201-M	1,8 mm	140 cm



Materialkomposition:  
48% Polyamid, 48% Polyester, 4% TPU



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

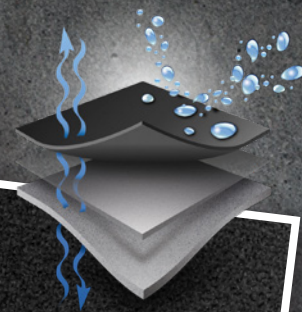

## P-ARX® Neptune™ 3,5 mm Polstring

Detta är en tjockare polstring som kan användas i ortoser för att tryckavlasta. Polstringen är tillverkad av Neptune™-materialet som den övre ytan mot huden. Neptune™ är andningsaktivt och hydrodynamiskt vilket gör att det torkar snabbt. Kärnan är tillverkad av 2 mm microperorerat CR-skum. Undersidan fäster mot I-ARX® Innertyget EU458101. Materialet är latexfritt.

**Lämpligt för:** Frakturortoser, spinal ortoser och knäortoser.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU458202	3,5 mm	58 cm	100 cm

Materialet finns också som helt ark:



Art.nr	Tjocklek	Mått
EU458202-S	3,5 mm	125 x 318 cm



Materialkomposition:  
40% Polyamid, 40% Polyester, 20% CR-foam



Tvättråd:  
60° C maskintvätt

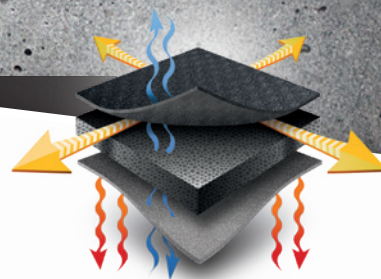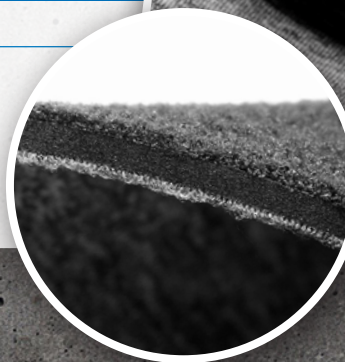

## Mediroyal SRX® Strap Material

Vårt populära SRX® Strap i större materialark. Materialet fäster i sig självt och är ventilerande med två olika elasticitetsriktningar beroende på hur det klipps till.

**Lämpligt för:** Olika ortoslösningar och som tunn polstring tillsammans med I-ARX® Inner Tyg.

### Camo Mönster

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU456900	1 mm	58 cm	100 cm

### Marinblå


Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU457900	1 mm	58 cm	100 cm



Materialkomposition:  
95% Polyester, 5% Elastan



Tvättråd:  
40° C maskintvätt

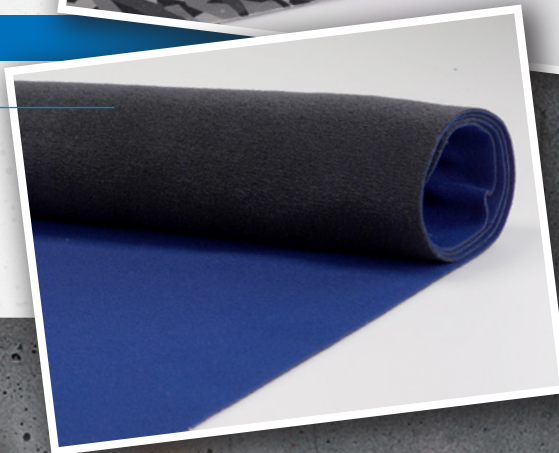

# Självhäftande polstring

Självhäftande polstring är en snabb lösning för att öka komforten i skenor. Det kan användas både över kanter och inuti skenan för komfort. Vårt självhäftande lim är vattenbaserat och allergitestat vilket gör det lämpligt för patienter med känslig hud. Alla självhäftande polstringsmaterial är latexfria.

## Ventilerande Mesh Självhäftande

Detta mesh-material är oelastiskt och är både tryckabsorberande och ventilerande, vilket kan användas över kritiska punkter på skenan. Den självhäftande filmen har en stark vidhäftning som fungerar på de flesta material, inkluderat PE.

Art.nr	Tjocklek	Bredd	Längd
EU471100	2,5 mm	58 cm	90 cm



Materialkomposition:  
85% Polyester, 15% Nylon



Tvättråd:  
Maskintvättbar i 40° C. När den applicerats i skenan är den begränsande faktorn, temperaturen för ortosmaterialet.



## Ventus™ Fleece Kantband och Polstring



Ventus™ Fleece materialet är en spunnen microfiber av polyester med en extremt mjuk yta för maximal komfort. Materialet är elastiskt vilket gör det enkelt att fästa över kanter genom att sträcka det. Det självhäftande limmet är vattenbaserat, allergitestat och fäster väl över de flesta ytor.

### Kantband

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU451020	20 mm	5 meter	Svart
EU451030	30 mm	5 meter	Svart

### Polstringsmaterial

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU451300	30 cm	1 meter	Black

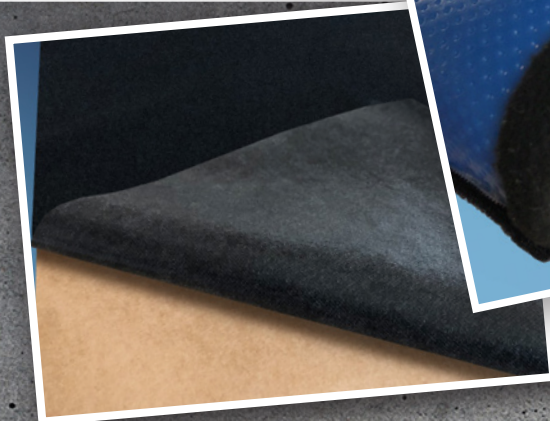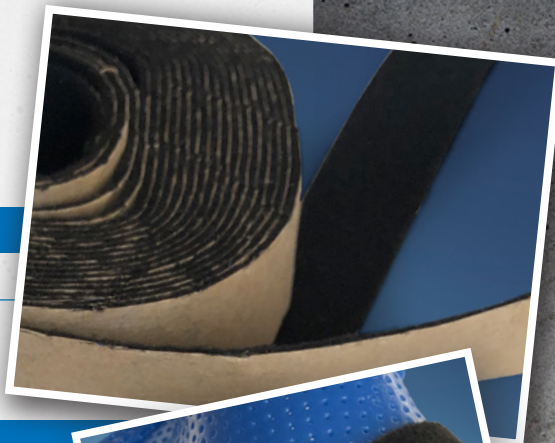

## Neptune™ Kantband och Polstring

Mediroyal Neptune™ materialet är ett hydrodynamiskt material som både koler huden, absorberar och transporterar fukt med hög komfort. Materialet är extremt tunt, 0,4 mm, vilket gör det möjligt att fästa inne i en patientanpassad skena med begränsad plats. Materialet är höglastiskt vilket gör det möjligt att fästa över tredimensionella former. Det självhäftande limmet är vattenbaserat, allergitestat och fäster väl över de flesta ytor.

### Kantband

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU461020	20 mm	5 meter	Grå
EU461030	30 mm	5 meter	Grå

### Polstringsmaterial

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU461300	30 cm	1 meter	Grå



## Mediroyal Double Soft Elastic

Double soft Elastic är ett tunt, semi-elastiskt material som kan användas för att stänga mindre ortoser som fotdelen på DAFO:s eller viloskenor. Double Soft Elastic formar sig efter anatomin och kan fästas på skenan med hjälp av den självhäftande kardborren som EU445060 eller EU445160. Finns i rullar om 3,1 m och i två bredder.

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU450080	80 mm	3,1 meter	Svart
EU450110	110 mm	3,1 meter	Svart



## Mediroyal X-Strap

X-Strap har utvecklats av Mediroyal och är ett dubbelsidigt band med mjukt kardborretextil. Det är ett stabilt band med 2% reducerad elasticitet som gör att bandet formar sig väl över komplexa ytor. Bandet kan klippas utan att det repar upp. Mediroyal X-Strap finns på 10 m rulle och i två bredder.

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU445240	40 mm	10 meter	Svart
EU445250	50 mm	10 meter	Svart



## Mediroyal C-Loop Strap

C-Loop är ett oelastiskt band som är baserad på ett konventionellt mjukt kardborreband som polstrats med en mjuk textil. C-Loop har en öppen tunnel som gör att man kan applicera förstärkningar som termoplast eller polstring direkt i bandet. Detta är en fördel vid infästningen med nit eller sömnad eftersom infästningen blir mer stabil.

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU445212	25 mm	15 meter	Svart
EU445213	30 mm	15 meter	Svart
EU445214	38 mm	15 meter	Svart
EU445215	50 mm	15 meter	Svart



# NRX<sup>®</sup> HEAT TAPE & LOOP HEAT TAPE

## Heat Tape för material

NRX Heat Tape ett värmeaktiverat band som kan användas för att fästa ihop två material utan att behöva sy dem. De kan också användas för att ge NRX Strap mer stabilitet eller minska elasticiteten. De appliceras enkelt med hjälp av ett vanligt strykjärn och ett bakplåtspapper som skydd över bandet. Den rekommenderade temperaturen är 120–140 grader och lamineringstiden ca 10 sekunder. Lamineringstiden kan ändras beroende på ytan på det underliggande materialet och dess komposition.

Det finns två olika kvaliteter beroende på funktion – NRX<sup>®</sup> Heat Tape och NRX<sup>®</sup> Loop Heat Tape.



### NRX<sup>®</sup> Heat Tape

Ett tunt nylonband med värmeaktiverat klister som kan användas för att fästa ihop två material mot varandra. Kan också användas på NRX Strap för att reducera elasticiteten eller för att ge ytterligare stabilitet. Finns i bredderna 22 mm, 35 mm och 30 cm.

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU490001	22 mm	10 meter	Svart
EU490002	35 mm	10 meter	Svart
EU490004	30 cm	1 meter	Svart


### NRX<sup>®</sup> Loop Heat Tape

Denna kvalitet har mjuk kardborre på ytan och ett värmeaktiverat klister på baksidan. Det kan användas för att applicera mjuk kardborrefunktion på textila ytor där det är svårt att kunna sy fast dem. Det kan också användas för att laminera thermoplast på NRX Strap, för att få en fästyta för kardborre eller för att öka stabiliteten. Finns i bredderna 50 mm och 30 cm.

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
EU490090	50 mm	5 meter	Svart
EU490091	30 cm	1 meter	Svart

# Mediroyal Hak-Clips

Mediroyal har utvecklat en produktserie med modulära hak-clips som enkelt kan användas för ortoser.

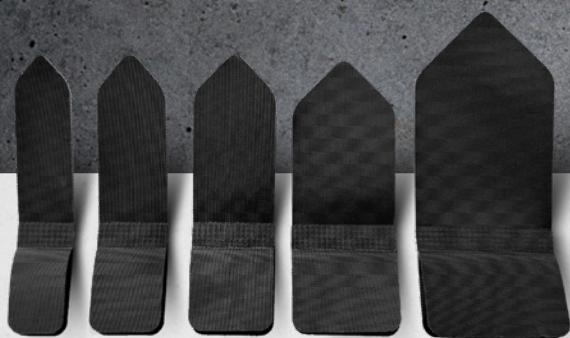

## Mediroyal Hak-Clips

Hak-Clipsen är tillverkad av injektionssprutad lågprofilhake med en bra infästning mot både konventionella kardborreband och lågprofiltextil. Hakinfästningen är 30 mm för alla bredder.

Art.nr	Bredd	Färg	Förpackning
EU445201	20 mm	Svart	10 pcs/förpackning
EU445202	25 mm	Svart	10 pcs/förpackning
EU445203	30 mm	Svart	10 pcs/förpackning
EU445204	38 mm	Svart	10 pcs/förpackning
EU445205	50 mm	Svart	10 pcs/förpackning

# Mediroyal Lågprofilhake

NRX® Lågprofilhake har utvecklats speciellt för att fungera på våra egna material. De är formsprutade med en utmärkt infästning och hög hållfasthet. Finns i olika kvaliteter som självhäftande, dubbellaminerad med hake och mjuk yta och dubbelhake. NRX®- haken finns olika kvaliteter i 25 meters rullar.



## NRX® Lågprofilhake


NRX®-kroken finns även i ett större dispenserpaket för kliniker som gör det enkelt att klippa till önskad längd.

- EU445060** NRX® Självhäftande Microhake · 50 mm x 25 m rulle · Transparent
- EU445160** NRX® Självhäftande Microhake · Strong · 50 x mm 25 m rulle · Svart
- EU445061** NRX® Microhake · 50 mm x 25 m rulle · Svart
- EU445161** NRX® Microhake Strong · 50 mm x 25 m rulle · Svart



## Stansade hakdelar på rulle, självhäftande

- EU445270** Myntformad hakdel 20 mm Ø, 5 m/rulle, Svart, ca 200 st
- EU445271** Myntformad hakdel 30 mm Ø, 5 m/rulle, Svart, ca 145 st
- EU445272** Oval hakdel 25 x 45 mm, 5 m/rulle, Svart, ca 165 st

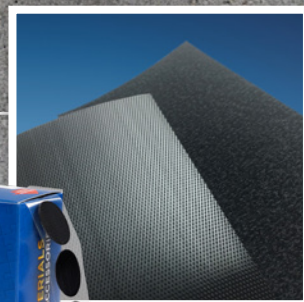

## NRX® Mjuk lågprofil

Detta är en mjuk kardborredel med låg profil som fungerar tillsammans med samtliga kvaliteter för lågprofilhaken. Materialet är semi-elastiskt vilket gör det möjligt att applicera den över komplexa tredimensionella ytor. Limmet fäster mot de flesta termoplaster inklusive PE.

- EU445280** Självhäftande mjuk kardborre, 50 mm x 25 m rulle, Svart



## NRX® Dubbelsidig hake

Detta är en dubbelsidig hake som kombinerar båda kvaliteterna; standardhaken på ena sidan och strong på den andra. Standardkvaliteten är transparent och strong haken är svart.


- EU445260** Dubbelsidig hake, standard/strong, 50 mm x 25 meter rulle, Transparent/Svart



## NRX® Elastisk kompressionshakband

NRX® elastiska kompressionshake ger en hög stabilitet och kompression. Den kan användas över höft och bål för att stabilisera och kompensera höft och ländrygg eller för att förstärka en fotled eller ett knä. Går också utmärkt att applicera direkt på NRX® Strap.

- EU445070** NRX® Elastiskt kompressionshakband, 50 mm x 25 m rulle · Svart
- EU445070-1** NRX® Elastiskt kompressionshakband, 50 mm x 1 m · Svart

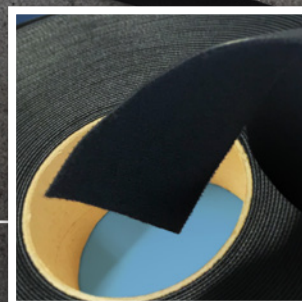



Vår NRX®-ARX®-SRX® katalog har fler olika material för ortoser tillsammans med olika applikationer. Den kan laddas ner från vår hemsida eller genom att använda QR-koden.



Orthoses are our passion



Mediroyal Nordic AB  
 Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna. Sweden  
 Tel 08-506 766 00 · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Mediroyal Asia Pacific Co. Ltd.  
 Unit A10, 20F., No. 282, Shizheng N. 2nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)  
 +886-4-2254-8069 · sales.mediroyal@gmail.com · www.mediroyal.se/en